


Configuration du produit



Instructions d'utilisation

Modèle de produit: JT - 88
Nom du produit: massEUR cervical
Puissance nominale: 4W
Temps de charge: environ 2 ~ 3 heures
Paramètres de charge: 5V=1A
Tension nominale: 3.7V=
Temps évalué: 15 minutes
Norme d'exécution: GB47061 - 2005
GB47061.10-2008

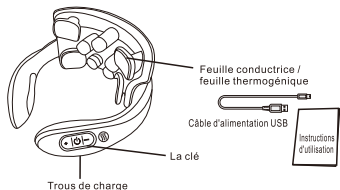

Instructions de fonctionnement pour J - 88 charge:

1. ☺ appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour activer / désactiver la fonction de message
2. ☺ touche d'allumage, appuyez brièvement sur le mode de réglage. Il y a 6 modes, avec le rapport correspondant et le son correspondant à chaque fois.
3. Fonction de charge: utilisez la tête de charge de téléphone portable 5V=1A pour charger. Le voyant rouge de charge s'allume et la pleine charge s'éteint. Lorsque la charge est faible, la machine s'éteint automatiquement après 5 bips. Veuillez facturer à temps.
4. Contrôle de chauffage, chauffage désactivé par défaut au démarrage, appuyez longuement sur la touche pour activer / désactiver le chauffage.
5. Contrôle de vibration, presse longue. ☹ Pour activer / désactiver le massage shake, appuyez brièvement pour sélectionner le mode de massage, 4 modes au total, le Shake est activé par défaut

法语