

APPAREIL DE BEAUTÉ POUR LE COU

M6



MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le soigneusement pour pouvoir le consulter à tout moment si nécessaire

Cet appareil de beauté du cou intègre le micro-courant EMS (ions galvaniques) + vibration + massage chaud + lumière rouge + verte + orange + bleue + froid qui favorisent conjointement la circulation sanguine, stimulent les points d'acupuncture du visage, du cou et des épaules, etc. pour drainer les méridiens. Il peut également éliminer les déchets accumulés de la peau et ralentir le vieillissement des cellules épidermiques pour affiner les lignes du cou, réduire les poches, détendre les épaules et le cou, éliminer rapidement la fatigue et restaurer l'énergie.

La forme en queue de dauphin de l'appareil adopte un concept de conception bionique exquis et unique. La tête de massage en forme de Y est conçue pour s'adapter parfaitement à la ligne de la mâchoire, au cou, aux épaules et aux autres parties de la courbe, transférant l'énergie à chaque centimètre de la peau.

- ▶ **Micro-courant EMS (ions galvaniques) :** Utilise le principe de l'anode et la cathode à courant d'impulsion le plus doux qui attirent, ramollissent et évacuent la graisse et la saleté.
- ▶ **Vibration :** Adopte une méthode de vibration physique et de stimulation électrique pour augmenter l'élasticité et améliorer le métabolisme cellulaire
- ▶ **Massage chaud :** Favorise l'absorption des produits de soin pour étirer la texture de la peau et préserver son élasticité.
- ▶ **Lumière rouge :** Longueur d'onde 640 nm - 650 nm pénètre profondément dans le derme, améliore la vitalité cellulaire, accélère la circulation sanguine, favorise la croissance des cellules fibreuses et du collagène pour réduire la mélanine et estomper les ridules.
- ▶ **Lumière verte :** Agit sur le derme superficiel, améliore l'utilisation de l'oxygénation cellulaire, favorise la microcirculation de surface, réduit l'œdème lymphatique et apaise la peau.
- ▶ **Lumière orange :** Pénètre efficacement la peau de 1 à 2 mm pour traiter l'érythème cutané, stimule la prolifération des fibroblastes, améliore la fonction immunitaire et répare la peau.
- ▶ **Lumière bleue :** A des effets antibactériens et anti-inflammatoires, inhibe la sécrétion de sébum, améliore la peau grasse, régule la kératine et resserre la peau relâchée.
- ▶ **Froid :** Rafrâchit et apaise la peau, soulage les rougeurs et les gonflements, affine les pores, renforce la capacité de réserve en eau et maintient la peau hydratée

La garantie (réparation gratuite) du produit pendant la période de garantie est valable à compter de la date d'achat :

1. Le produit est garanti 6 mois à compter de la vente, mais pas pour les pièces ;
2. Le service de garantie n'est valable que dans des conditions normales d'utilisation ; tout dommage artificiel, tout auto-démontage, toute utilisation inappropriée ou tout dommage n'est pas couvert par la garantie ;
3. La carte de garantie est requise pour la garantie. Veuillez ne pas modifier cette carte sans autorisation ;
4. Veuillez conserver cette carte correctement. En cas de perte, elle ne sera pas rééditée ;
5. Le service de garantie sera maintenu gratuitement conformément à la période de garantie et aux conditions spécifiées dans cette carte de garantie, et la maintenance après la période de garantie sera facturée ;
6. Les frais de transport et les frais logistiques liés à la maintenance sont à la charge du client ;
7. Les produits d'imitation non fabriqués par notre société ne bénéficient pas du service de garantie.

CARTE DE GARANTIE ET CERTIFICAT

.....

CARTE DE GARANTIE

Nom du produit		APPAREIL BEAUTY NECK	Numéro de modèle	M6
Distributeur				
Informations utilisateur	Nom			
	Adresse			
	Tél.			
Phénomène défectueux				

Pour toute réparation, veuillez compléter les informations.

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Nom du produit : APPAREIL BEAUTY NECK

N° de modèle : M6


Niveau de qualité : Qualifié

Inspecteur : _____

Date d'inspection : _____

La fabrication, l'assemblage et les performances de ce produit ont été testés et répondent aux normes de qualité de l'usine. Il a été approuvé pour la commercialisation

STRUCTURE ET PARAMÈTRES

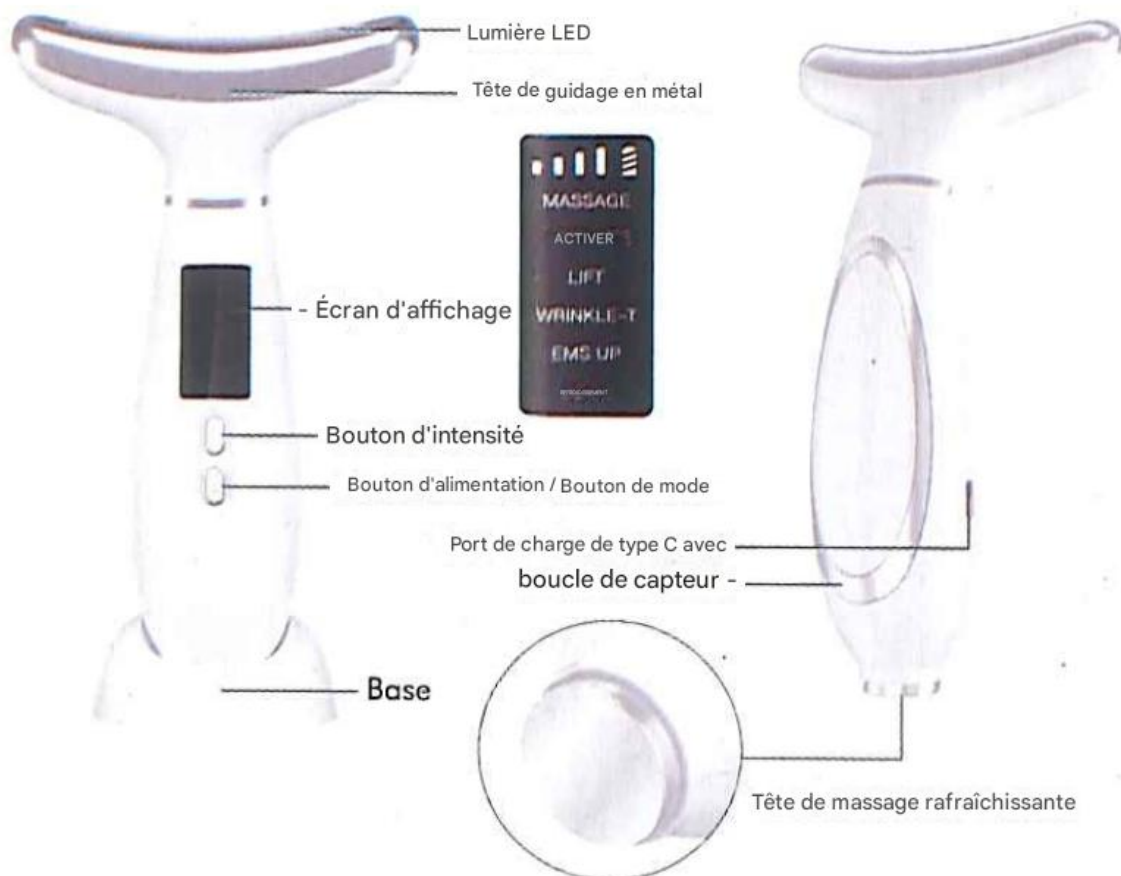

[] Bouton d'alimentation et bouton de mode : Appui long — MARCHE/ARRÊT, appui court - changer de mode.

[000] Bouton d'intensité : Appui — court pour changer d'intensité.

[.] Icône d'intensité : Les quatre engrenages correspondent aux quatre barres verticales.

[] Icône de batterie : En état de fonctionnement (veille), toujours allumé, faible puissance - rouge clignotant, besoin de charge, charge en charge, blanc clignotant, complètement chargée - toujours allumée.

Nom du produit	APPAREIL DE BEAUTÉ POUR LE COU	N° de modèle	M6
Entrée	DC5V	Puissance	3W
Capacité de la batterie	800mAH	Engrenage d'intensité	4
Norme exécutive	GB4706-2005	Mode soin de la peau	6
Dimensions du produit	150 x 90 x 48 mm (5,9 x 3,5 x 1,8 pouces)		
Contenu de l'emballage	Appareil principal Base Câble de charge Manuel d'utilisation		

DESCRIPTION DU MODE



01

【MASSAGE】

Masser la peau
Nettoyer les pores



02

【ACTIVER】

Accélérer la circulation
Rajeunir la peau



03

【LIFT】

Éclaircir la peau
Essence d'introduction



04

【WRINKLE-T】

Réparer et récupérer
Atténuer les rides



05

【EMS UP】

Restaurer l'élasticité
Lifter et raffermir



06

【COOL】

Rafrâchir et rafraîchir
Garder humide

ÉTAPES D'UTILISATION



1. Nettoyer

Veuillez effectuer l'étape de nettoyage
sur votre cou avant utilisation.



2. Compresse chaude

Placez une serviette chaude sur votre
cou pendant environ 2 minutes.



3. Appliquer

Appliquez les produits de soin (crème
**pour le cou, crème de
massage, huile essentielle, etc.)** sur
votre cou



4. Choisir le mode

Allumez-le, choisissez le mode et l'intensité souhaités (il est recommandé d'utiliser la première vitesse la première fois).

5. Soins de la peau

Placez la tête de guidage métallique près de votre peau, massez de bas en haut pendant environ 5 à 10 minutes par fois (évitiez la pomme d'Adam).

6. Entretien

Après utilisation, nettoyez le produit avec un chiffon doux et rangez-le dans un endroit bien ventilé.

Conseil :

1. Lors de l'utilisation, veuillez tenir ou toucher la boucle du capteur d'ions et mettre le guide métallique ou la tête de massage rafraîchissante en contact avec votre peau pour former un circuit et le produit fonctionnera normalement ;
2. Lors de l'utilisation, gardez la peau humide, l'effet est meilleur ;
3. **Recommandé deux fois par jour, le matin et le soir.**

ATTENTION

1. Après avoir reçu le produit, veuillez le charger complètement avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas pendant la charge ;
2. Veuillez d'abord faire l'expérience partielle sur la peau. Arrêtez l'utilisation si vous êtes allergique.
3. Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois ou que vous ne vous y êtes pas habitué, veuillez utiliser la première vitesse.
4. En cas d'inconfort ou d'anomalie pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement **de l'utiliser.**
5. Si le câble de chargement USB est endommagé, veuillez le remplacer immédiatement.
6. Le temps de charge est d'environ 2 heures.
7. Le produit s'éteint automatiquement pour se protéger s'il n'y a aucune action sur un bouton dans les 5 minutes.
8. **Le produit n'est pas étanche, ne l'utilisez pas sous la douche.**
9. Tenir hors de portée des enfants pour éviter tout risque.
10. N'utilisez pas le produit à proximité de flammes ou d'explosifs.
11. **Placez le produit dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et des produits chimiques corrosifs.**
12. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, assurez-vous de le charger une fois tous les 6 mois
13. Le produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée. Veuillez la jeter conformément à la réglementation locale