

Instrument de beauté chaud et froid



Manuel d'instructions

Merci d'avoir acheté ce produit ! Pour une utilisation optimale, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Conservez-le précieusement pour pouvoir le consulter à tout moment.

À propos de ce manuel :

Les photos et les caractéristiques des produits présentées dans ce manuel, ainsi que les explications de certains termes, sont données à titre indicatif uniquement. Le produit réel fait foi lors de son utilisation par l'utilisateur, et les données citées proviennent du laboratoire de l'entreprise.

1. Précautions de sécurité

Assurez-vous de lire les précautions de sécurité avant utilisation.

Veuillez utiliser ce produit correctement conformément au contenu et aux recommandations du manuel.

 Danger	Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles.
 Avis	Une utilisation incorrecte entraînera des dommages à la sécurité personnelle ou à la propriété.

Danger

---Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec ce produit ou le câble de charge qui répond aux spécifications du produit, et connectez correctement la fiche du chargeur à la prise domestique pour éviter tout dysfonctionnement, incendie ou incendie dû à la chaleur.

---Étant donné que ce produit possède une batterie rechargeable intégrée, ne mettez pas ce produit au feu et ne l'utilisez pas dans un environnement à haute température ou à forte chaleur, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement, un incendie ou un incendie dû à la chaleur.

---Si le produit est anormalement chaud ou déformé, endommagé ou a une odeur particulière, ne l'utilisez plus pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie.

Un avis

---Ce produit est un produit de massage personnel et ne peut remplacer les médicaments ou les dispositifs médicaux.

---Ce produit ne convient pas aux personnes ayant des problèmes physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de bon sens (y compris les enfants), à moins qu'un tuteur ne supervise et guide l'utilisation du produit et puisse assumer la responsabilité de la sécurité des utilisateurs.

---Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

--- Placez les matériaux d'emballage (tels que les sacs en plastique) hors de portée des enfants.

---Si la machine est endommagée ou si le fonctionnement du produit est anormal, afin d'éviter tout danger, elle doit être réparée par des professionnels du fabricant, de son service de maintenance ou de services similaires.

---Ce produit n'est pas étanche, évitez donc les éclaboussures d'eau sur la surface du produit lors de son utilisation.

Veuillez ne pas utiliser ce produit pendant le bain.

---Lors du nettoyage et de l'entretien, veuillez éteindre la machine et le faire à l'état éteint.

---Ne pas stocker ni utiliser ce produit dans une salle de bain ou une autre pièce humide.

Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur et d'endroits inflammables, il est sujet à des pannes et à des dangers, et il est facile de provoquer une déformation, une décoloration ou des dommages.

Si vous ressentez une anomalie de cet appareil pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le service après-vente de l'usine.

Si vous ressentez des anomalies physiques ou des douleurs lors de l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé.

Non recommandé aux personnes souffrant de dermatite, de lésions cutanées, d'eczéma, de gonflements, etc.

2. Introduction

Cet instrument de beauté chaud et froid combine chaleur, vibrations, glace, massage, lumière colorée et gua sha pour un massage de la peau optimal. Intégrant une conception ergonomique aux courbes variées, il offre un massage à température constante et un effet astringent de la glace. Il est également utilisé pour masser et racler le corps et les points, procurant un massage musculaire confortable.

3. Nom de la pièce



Le mode compression à chaud s'éteint automatiquement après 10 minutes de fonctionnement.
Le mode compression à froid s'éteint automatiquement après 5 minutes de fonctionnement.

4. Fonctionnement

(I) Modes fonctionnels

1. Mode 1 : compresse chaude + lumière rouge, touche allumée lumière rouge ;
2. Mode 2 : Compresse froide + lumière bleue, appuyez sur la touche pour allumer la lumière bleue ;
3. Mode 3 : micro-courant + lumière violette, appuyez sur la touche pour allumer la lumière violette ;
4. Appuyez longuement sur le bouton M dans chaque mode pour activer/désactiver la vibration.

(ii) Fonctionnement des touches

1. Allumer/éteindre : Appuyez longuement sur le bouton pendant environ 1 seconde. 2;
 2. Changement de mode : appuyez brièvement sur le bouton M pour basculer entre trois modes après avoir allumé la machine ;
 3. Changement de vitesse : appuyez brièvement sur le bouton après avoir allumé la machine pour faire défiler les vitesses 1 à 3.
- Veuillez charger complètement la machine avant de l'utiliser pour la première fois.
- Lorsque la puissance est faible.
- Connectez la machine au câble de charge et au chargeur, et branchez-la sur une prise de courant domestique ; --
- Connectez la machine au câble de charge et au chargeur,

et branchez-le sur une prise de courant domestique.


Pendant la charge, le voyant rouge du bouton marche/arrêt clignote. Une fois la charge terminée, le bouton ne clignote plus.

--Ce produit ne peut pas être allumé en état de charge.

【Préparation avant utilisation】

● Choisissez la lotion qui vous convient et appliquez-la uniformément sur la zone à traiter.


- Essuyez la machine avec un chiffon propre.
- Utiliser sur une peau propre ou après le bain

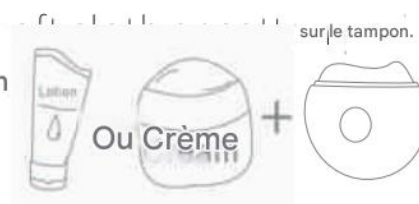

Massage complet du corps




Massage du visage
Sélectionnez le mode selon vos besoins, soulevez-le du menton, de la joue jusqu'à la racine de l'oreille dans un mouvement ascendant

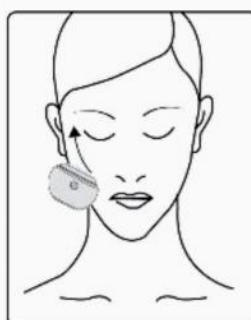


Massage des yeux
Sélectionnez le mode selon vos besoins, effectuez des mouvements ascendants à l'extérieur de la zone des yeux, évitez tout contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes




Massage des épaules et du cou
Sélectionnez le mode selon vos besoins, soulevez-le de votre épaule jusqu'au haut du cou

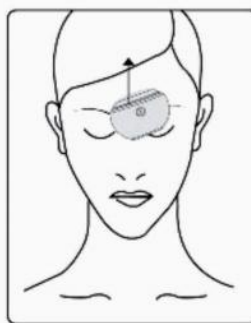

Massage du front
Sélectionnez le mode selon vos besoins, glissez sur votre front avec des mouvements ascendants

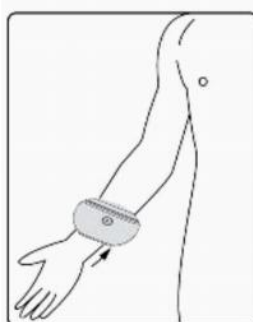


Massage des mains
Sélectionnez le mode selon vos besoins, glissez sur votre avant-bras

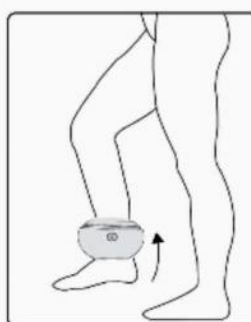


Massage des jambes
Sélectionnez le mode selon vos besoins, glissez sur votre mollet


Gua Sha Poussant Grattage

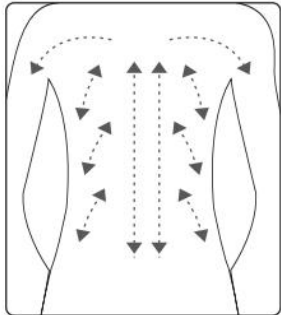

dos

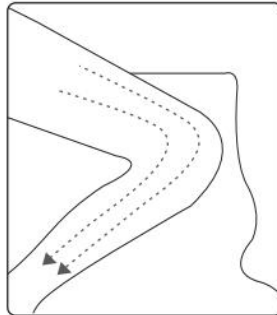

jambe

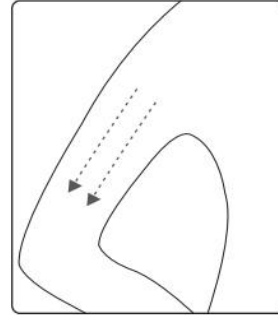

main

Beauté du visage



1. Nettoyant



2. Lotion/Huile



3. Ascenseur à chaud



4. Masque facial

Lifting et raffermissement du visage en V.




Lifting du visage en V

Soulevez la hauteur du muscle de la pomme du côté du menton vers le haut le long de la mâchoire




Réduire l'apparence des lignes

Lifting de l'extrémité latérale du nez ou du coin de la bouche le long du contour extérieur de la pommette jusqu'au lobe de l'oreille

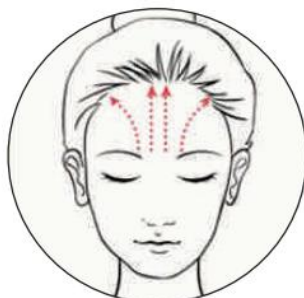

Réduire les lignes de tête

Commencez par le dessus des sourcils et soulevez du bas jusqu'à la racine des cheveux.

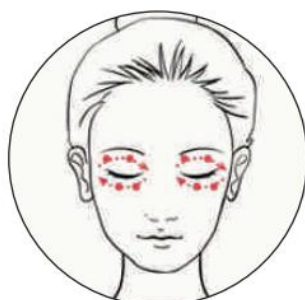

Éliminer les poches sous les yeux

Commencez par le dessous du coin de l'œil et suivez la courbe de l'œil externe jusqu'à la tempe.

5. Entretien et maintenance

- Avant le nettoyage, veuillez éteindre la machine.
- Protégez l'appareil de l'humidité.
- N'utilisez pas de nettoyeurs diluants agressifs, corrosifs ou volatils, vous pouvez utiliser un chiffon doux humide ou un coton pour essuyer délicatement.
- Ne rincez pas l'appareil directement avec de l'eau pour éviter tout dommage causé par l'eau pénétrant dans la machine.

6. Questions nécessitant une attention particulière

1. Ce produit est un instrument de soins infirmiers et non un dispositif médical. Il n'a aucun effet thérapeutique. Si vous avez besoin d'un traitement, de médicaments, etc., veuillez consulter un médecin ou une personne compétente.

-- Nous offrons une garantie d'un an pour le produit, et la période de garantie commence à compter de la date d'achat.

– Pendant la période de garantie, nous remplacerons les pièces ou le produit entier selon le cas en raison de défauts de matériau ou de processus de production.

-- Pour bénéficier de la garantie, le produit et la preuve (facture d'achat) pouvant prouver la date d'achat doivent être remis à un centre de réparation ou à une usine agréée pour le service après-vente.

-- La société ne garantit pas les conditions suivantes :

-- Dommages dus à une mauvaise utilisation, tels que : utilisation d'une mauvaise alimentation électrique, branchement du produit sur une prise inadaptée, dommages causés par l'homme, etc.

-- Le vieillissement et l'usure du produit causés par une utilisation normale, mais cela a peu d'effet sur la fonction d'utilisation du produit.

-- Utilisé à d'autres fins, ou fonctionnement incorrect ou entretien non professionnel ou utilisation d'accessoires non fournis par l'entreprise, entraînant des problèmes de produit

-- Consommables, accessoires et autres accessoires consommables.

--Dommages causés par des facteurs de force majeure (tels que la foudre, un tremblement de terre, un incendie, une inondation, etc.).

Le service après-vente ne couvre pas non plus les dommages causés par les raisons ci-dessus.

7. Traitement des déchets

Ce marquage, apposé sur ce produit, son manuel d'instructions ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers en fin de vie. Veuillez consulter votre municipalité pour connaître les modalités de recyclage en fonction de la classification des déchets.



8. Protection de l'environnement

Ce marquage sur ce produit, son emballage ou ses accessoires indique que ce matériau est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Triez les déchets selon différentes catégories de recyclage pour faciliter le recyclage des matériaux utiles.



9. Paramètres techniques et emballage

Nom du produit : instrument de beauté chaud et froid.

1. Dimensions hors tout : 95*89*34mm ;
2. Poids net : 132 g ;
3. Matériau : ABS + PC + alliage de zinc + silicone ;
4. Capacité de la batterie : 800 mAh
5. Méthode de charge : câble USB, 5 V/1 A ;
6. Indice d'étanchéité : IPX0

Liste de colisage : hôte *1, câble de chargement USB *1, manuel

*17.

Remarque : Compte tenu de la politique constante d'amélioration continue des produits, la société se réserve le droit de modifier les spécifications des produits, et le produit réel est soumis à l'expédition.