



Rendez votre corps
attrayant

Manuel d'utilisation

▲ Affichage sous tension ?

▲ Impossible de mettre sous tension ?

Veuillez lire attentivement le
manuel ou contacter le service
client pour obtenir des conseils.

Technologie de micro-courant électrique EMS

Nbody FOR YOU

- Technologie de micro-courant électrique EMS
- Convient aux personnes qui sont occupées au travail et n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport pour faire de l'exercice.
- Obésité causée par des habitudes de vie irrégulières

WITH *Nbody*

Appuyez automatique	sur la touche de démarrage pour renforcer
Mobile	peut être utilisé n'importe où, en voyage au bureau, en voyage d'affaires, à la maison
Approprié	l'intensité est ajustée selon le niveau de 0-150 selon l'endurance physique de l'individu
Puissant	1 à 10 modes Choisissez librement

Écran LCD d'affichage des instructions clés

Affiche principalement la capacité de la batterie, le temps d'entraînement, l'intensité, le mode et l'état de fonctionnement



Nbody + mode d'emploi

Tout d'abord, retirez le film protecteur des deux côtés de la pièce d'électrode, collez la grille face au poteau dans le cadre en fil blanc à l'intérieur du produit, contactez la boucle métallique et contactez la peau du corps de l'autre côté, fixez-la sur le corps, la taille, le bras, la cuisse, le bras, etc. correspondants, afin d'éviter un mauvais contact

Remarque : après utilisation, le patch peut être laissé sur le produit et peut être collé avec un film protecteur. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, déchirez la pièce d'électrode pour le stockage. En cas d'allergie (bulle, bouton rouge) sur la peau pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et consulter le service client


Ceinture de renforcement en plastique intelligente



Bras fin



Renforcez votre jambe

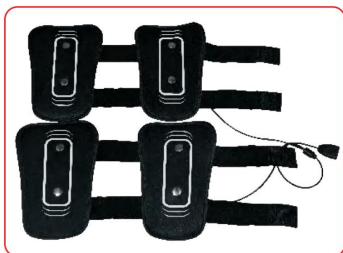

Le lifting des hanches renforce vos jambes



Connectez l'interface hôte à l'interface produit, flèche à flèche, et insérez-la complètement sans espace



Appuyez et maintenez enfoncée la touche d'alimentation pour allumer et éteindre la machine. (Si le moteur principal est en mauvais contact avec le produit, il clignotera L et une alarme, et il s'éteindra automatiquement après 30 secondes.) À ce stade, veuillez vérifier si le moteur principal et le produit sont complètement insérés et connectés, si le produit est correctement porté et en contact avec la peau.



Appuyez sur la touche p pour sélectionner le mode. Il existe 10 modes à sélectionner. Le mode ne peut pas être changé lorsque l'hôte fonctionne

Mode d'emploi



Appuyez sur le bouton supérieur des deux côtés, le produit commence à fonctionner (intensité de 0 à 150 degrés, ajustez l'intensité en fonction de votre endurance, Pour la première utilisation, il ne peut pas dépasser les 30 degrés, appuyez longuement sur le bouton, il peut régler l'intensité en continu



Appuyez sur la touche L pour afficher la dernière force de réglage, les temps de travail, le type de produit et d'autres informations



Pendant le fonctionnement de l'hôte, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour suspendre le fonctionnement et appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour l'éteindre après utilisation. (notez que lorsque la puissance est trop faible, l'heure s'affiche comme « 0 », et le symbole de la batterie et le symbole I clignotent pour déclencher l'alarme. 30 secondes plus tard, mise hors tension)

Réglage de l'intensité (de 0 à 150 degrés)

Réglage de l'intensité : 0 à 150 degrés

Lorsque l'intensité est faible, je sens que l'abdomen bouge légèrement. Lorsqu'il se renforce lentement, je commence à bouger de la taille vers les deux côtés de la taille. J'ajuste lentement l'intensité en fonction de ma capacité de charge et de mon organisation musculaire. Il est préférable de l'ajuster à l'intensité appropriée. Au début de 3 minutes, l'effet de préparation à l'exercice est 3 minutes plus tard Le phénomène de début d'exercice des muscles et la sensation d'amincissement ont commencé à apparaître lorsque le mode de préhension était serré.

Réglage du programme

Nbody les produits ont 10 modes, vous trouverez ci-dessous les principales fonctions de chaque mode

- | | | | |
|---|--------------|------|--|
|  | 20:00 | [1] | Mode 1 : Temps de travail 20 min |
|  | 25:00 | [2] | Mode 2 : Temps de travail 25 min |
|  | 30:00 | [3] | Mode 3 : Temps de travail 30 min |
|  | 30:00 | [4] | Mode 4 : Temps de travail 30 min |
|  | 30:00 | [5] | Mode 5 : Temps de travail 30 min |
|  | 30:00 | [6] | Mode 6 : Temps de travail 30 min |
|  | 30:00 | [7] | Mode 7 : Temps de travail 30 min |
|  | 40:00 | [8] | Mode 8 : Temps de travail 40 min |
|  | 1:01 | [9] | Mode 9 : Il y a 3 sections au total, 10 sorties pour chaque section, avec un intervalle de 20 s |
|  | 1:01 | [10] | Mode 10 : Il y a 3 sections au total, 10 sorties pour chaque section, avec un intervalle de 20 s |

Remarques

Les produits peuvent-ils être utilisés sur d'autres parties de l'abdomen ?

Oui, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Aucun produit ne peut être utilisé pour d'autres parties de l'abdomen. Veuillez vérifier le réglage du programme.

Combien de temps faut-il pour que cela fonctionne ?

Faites-le une ou deux fois par jour pendant 30 à 60 minutes et cela commencera à fonctionner dans trois mois.

Puis-je l'utiliser pendant mon sommeil ?

Il vaut mieux ne pas l'utiliser pendant le sommeil.

Lors de l'utilisation du produit, appuyez sur la touche pour allumer et l'écran LCD ne fonctionne pas ?

Lors de l'utilisation du produit, il se produit un phénomène de décharge. Veuillez l'utiliser après le chargement.

Puis-je utiliser ce produit après avoir donné naissance à un enfant ?

Nos produits sont destinés aux personnes en bonne santé. Ils peuvent être utilisés dès 3 mois après la naissance.

Quelle est la durée de vie de la batterie ?

Ce produit utilise une batterie rechargeable, qui peut être chargée et déchargée 300 fois en utilisation normale

La peau est un peu rouge après utilisation, est-ce normal ?

Certains d'entre eux auront la peau rouge, qui disparaîtra avec le temps.

En général, nous aurons également des marques lorsque nous porterons des vêtements moulants.

Problèmes courants

Question 1

Il fait très froid pour coller l'électrode sur le haut du corps

- Oui, bien sûr, c'est normal, la température corporelle se rétablira dans environ 3 à 5 minutes

Question 2

L'électrode est chaude

- En cours d'utilisation, s'il y a une permanente, le patch vieillit, il faut donc améliorer le RQM
- On ne peut pas le coller là où il y a une blessure
- L'électrode doit être bien serrée contre la plaie

Question 3

Et s'il n'y a pas d'électricité ?

- Chargement avec le chargeur offert par l'usine

Question 4

Aucun sentiment ?

- Vérifiez si l'électrode est proche du corps
- Réglage approprié à 20-30 vitesses

Question 5

Démangeaisons cutanées pendant l'utilisation

- Ajustez l'intensité en fonction de vos sentiments personnels
- Assurez-vous que la plaie est exempte de symptômes et d'inflammation

Question 6

L'écran LCD affiche ERR

- Retirez la batterie et remplacez-la

Problèmes courants

Question 7 Il a fallu quelques jours pour que les électrodes sèchent

- Si l'électrode est recouverte de poussière ou sèche à cause des intempéries, nettoyez-la à l'eau claire et séchez-la. Elle peut être utilisée en continu

Question 8 Au début, la force des deux camps est plus forte que celle du milieu

- Parce que la force des côtés gauche et droit du corps est plus forte que celle du milieu, l'intensité de sortie du signal est la même chose, qui peut se refléter en augmentant l'intensité

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sûre de ce produit, veuillez lire attentivement ce qui suit.

Au début de l'utilisation, la force ne doit pas être trop forte, afin d'éviter de blesser le corps et de laisser le corps s'adapter lentement.

Pour une utilisation en toute sécurité

- Lisez le manuel avant utilisation et utilisez-le conformément à la méthode d'utilisation du manuel.
- Ce produit n'est pas un jouet, il ne peut donc pas être utilisé ou touché par des enfants. Vous devez également le tenir éloigné des enfants lorsque vous l'utilisez pour éviter tout contact avec eux.
- Notre société n'est pas responsable de tout accident causé par le non-respect des exigences par le consommateur.
- Il est normal d'avoir des marques rouges lors de l'utilisation, qui disparaîtront en peu de temps. Cependant, en cas d'allergie cutanée excessive et d'inflammation, il est nécessaire d'arrêter l'utilisation et de se rendre à l'hôpital pour un examen.
- Lors de l'utilisation de ce produit, n'en abusez pas afin de perdre du poids plus rapidement, ce qui pourrait nuire à l'exercice excessif du corps.
- Ne pas utiliser s'il y a un défaut ou si vous pensez qu'il y a un défaut

Dons et dons

- Gardez le produit hors de portée des enfants
- Ne touchez pas d'autres pièces conductrices ou d'autres dispositifs électroniques lors de l'utilisation, ne les utilisez pas lorsque vous conduisez ou utilisez d'autres machines

Consignes de sécurité

Veuillez consulter votre médecin pour les symptômes suivants

- Blessure du patient ou du corps
- Les personnes qui ont récemment subi une intervention chirurgicale
- Femmes dans les 6 semaines suivant l'accouchement
- Autres patients sous traitement
- Les personnes diabétiques sont traitées
- Une personne souffrant d'une inflammation de la peau

Les personnes présentant les symptômes suivants doivent cesser d'utiliser

- Ne pas utiliser si l'anémie, les douleurs thoraciques et les vomissements sont anormaux
- Ne pas utiliser s'il y a un défaut ou si vous pensez qu'il y a un défaut
- Lorsque des personnes ou des animaux sont proches du corps, les boutons ne sont pas flexibles ou vous pensez qu'il y a un défaut

Les produits ne peuvent pas être stockés dans les endroits suivants

- Un endroit à température élevée ou basse
- Un endroit poussiéreux et humide
- Là où il y a beaucoup de fumée et de vapeur
- Afin d'éviter les accidents, veuillez utiliser les produits fournis par le fabricant
- Ce produit ne doit pas être mouillé. S'il est mouillé, essuyez-le immédiatement avec une serviette humide.
- Veuillez jeter les déchets conformément à la réglementation sur les déchets.

Ne pas utiliser si vous présentez les symptômes suivants

- Les médecins diagnostiquent les patients qui ne peuvent pas travailler dur
- Fièvre ou fatigue
- Les cœurs artificiels ou les personnes ayant des équipements thérapeutiques dans le corps ne peuvent pas les utiliser
- Patients qui se rendent souvent à l'hôpital en raison d'un cancer ou d'autres désagréments physiques

Veuillez lire ce qui suit pour une utilisation sûre de ce produit

- Ne pas trop ajuster l'intensité lors de l'utilisation de ce produit au début. Nous devons nous adapter lentement à l'intensité de l'exercice
- Ne pas utiliser trop
- Afin de changer la pièce d'électrode pendant l'utilisation, l'hôte doit d'abord être arrêté, puis collé sur la position correcte de la pièce d'électrode
- Lorsque vous faites trop d'exercice ou que vous êtes fatigué, vous devez commencer par la vitesse la plus basse et ajuster lentement votre relaxation musculaire.



Paramètre technique

■ Composants

- produits
- pièce d'électrode
- Chargeur d'hôte
- hôte
- Manuel d'utilisation

Performance

- Reportez-vous au manuel pour connaître la fonction et le mode de fonctionnement
- Veuillez vous référer au manuel d'instructions
- Autres précautions nécessaires
- Protection et niveau de choc électrique, type d'alimentation interne, type BF Tension
- d'entrée DC4.5v

Garantie du produit ou garantie de qualité

La période de garantie du produit hôte est d'un an, hors pièces consommables. En cas de panne lors de l'utilisation, soumettez le certificat de garantie du produit et le produit au lieu d'achat ou au fabricant, nous le réparerons gratuitement. Si la période de garantie est dépassée, le client devra prendre en charge les frais de réparation

Manuel du produit

Nom du produit	Ceinture de mise en forme intelligente
Numéro de modèle	MS-102
Tension de la batterie	3,7 V
Tél.	0755-89566981
Fabricant	Technologie biologique de Shenzhen Kangen Co., Ltd.
Adresse	2e étage, n° 1 Aoxiang Rd, quartier Zhangbei, rue Longcheng, district de Longgang, Shenzhen

