


Appareil de beauté du visage à LED pour rajeunissement de la peau par photons




Manuel d'instructions

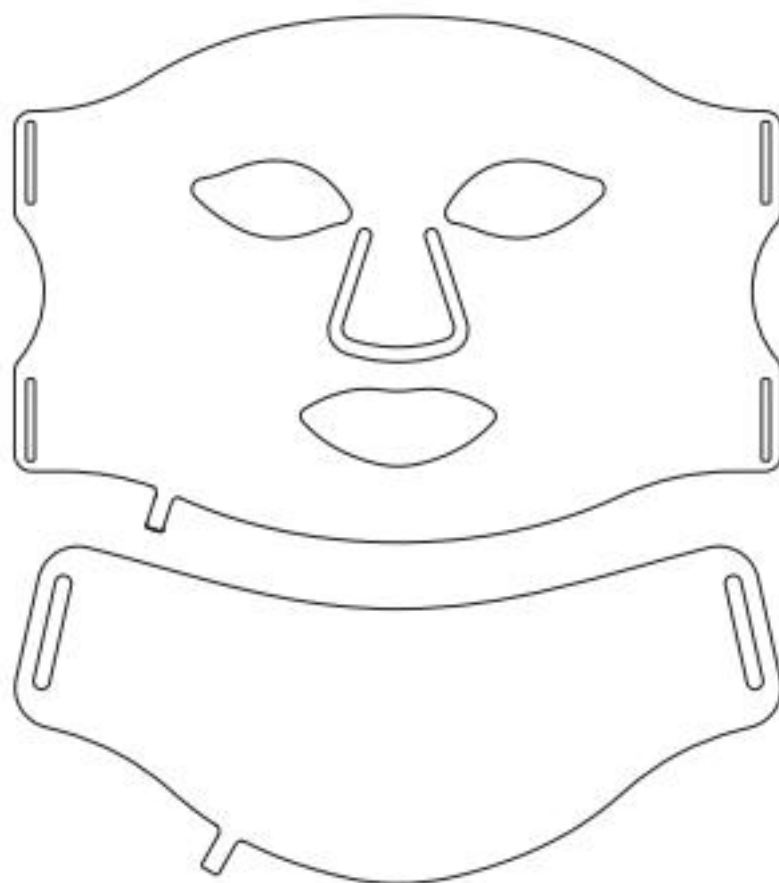

Merci d'avoir choisi nos produits !

Simplifiez-vous la vie avec le rajeunissement de la peau par photons LED Face Pour votre commodité, veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser le produit car cela peut expliquer des procédures de fonctionnement importantes.

L'appareil de beauté du visage à LED pour le rajeunissement de la peau par photons est un appareil de beauté du visage à LED portable et rechargeable pour un usage domestique. La structure de surface de ce produit est composée d'un matériau en silicone alimentaire, qui est pratique et facile à utiliser, pliable et portable, et peut être fixé avec une boucle en nylon réglable, adaptée à différents groupes de personnes. Il a toujours 70x3=210 faisceaux, il résout fondamentalement le problème du blanchiment et du vieillissement de la peau, c'est-à-dire : augmenter l'activité cellulaire ; favoriser le métabolisme cellulaire, de sorte que la peau sécrète du collagène et des fibres pour se remplir d'elle-même. Accélérer le flux sanguin, augmenter l'élasticité de la peau, améliorer le suivi de la peau, toutes les conditions, afin d'obtenir un blanchiment, un ajustement de la peau, une anti-écriture, une tache lumineuse et d'autres effets réparateurs.

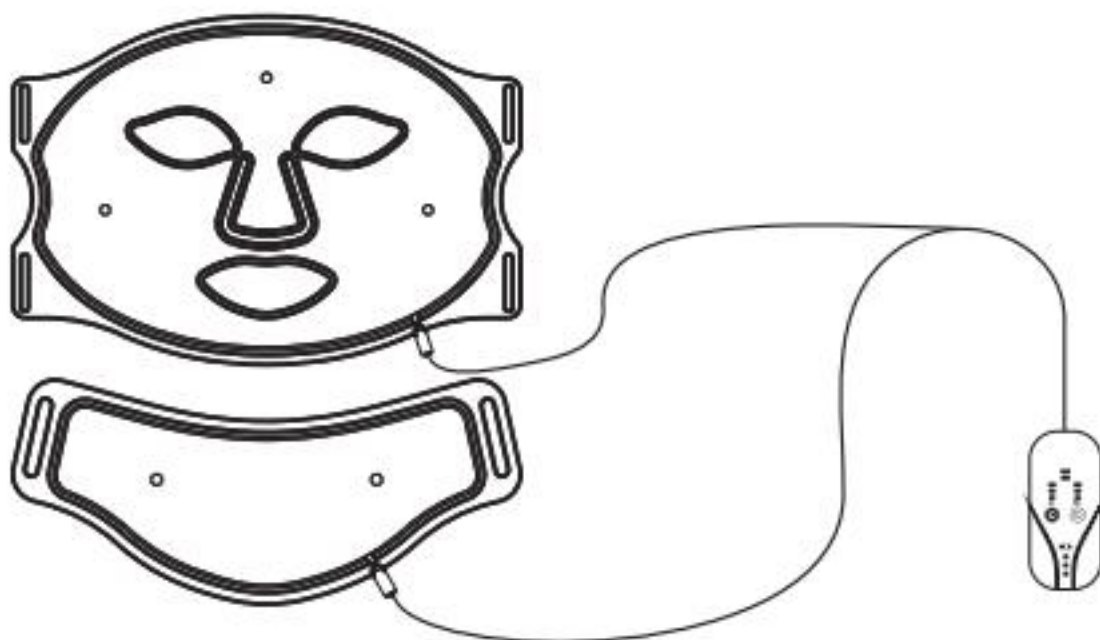

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Première configuration


Avant d'ouvrir l'emballage pour l'utiliser, assurez-vous que la poignée du contrôleur de l'instrument de beauté du visage est complètement chargée, le voyant du contrôleur commencera à clignoter, indiquant qu'il est en cours de chargement. Une fois complètement chargée, le voyant de la batterie cessera de clignoter, indiquant que la charge est terminée. Le temps de charge est de 4 à 5 heures.

La mise en place de l'instrument de beauté du visage avec la sangle de fixation réglable vous permet de porter l'instrument de beauté du visage confortablement. Lorsque vous devez installer le produit, faites passer la sangle dans le trou d'entrée de l'autre côté du masque, enroulez la sangle autour de votre visage et fixez-la solidement.


Schéma d'installation

Installer des sangles auto-agrippantes

Connectez l'appareil et le contrôleur

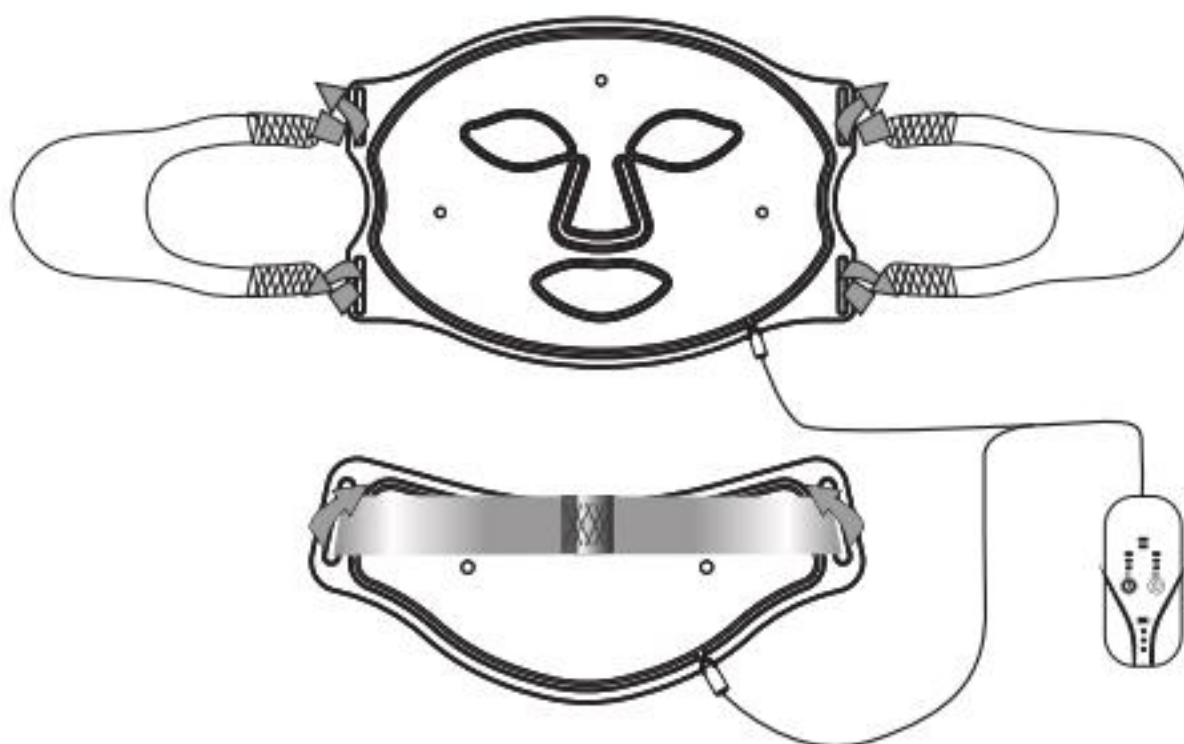

Contrôleur

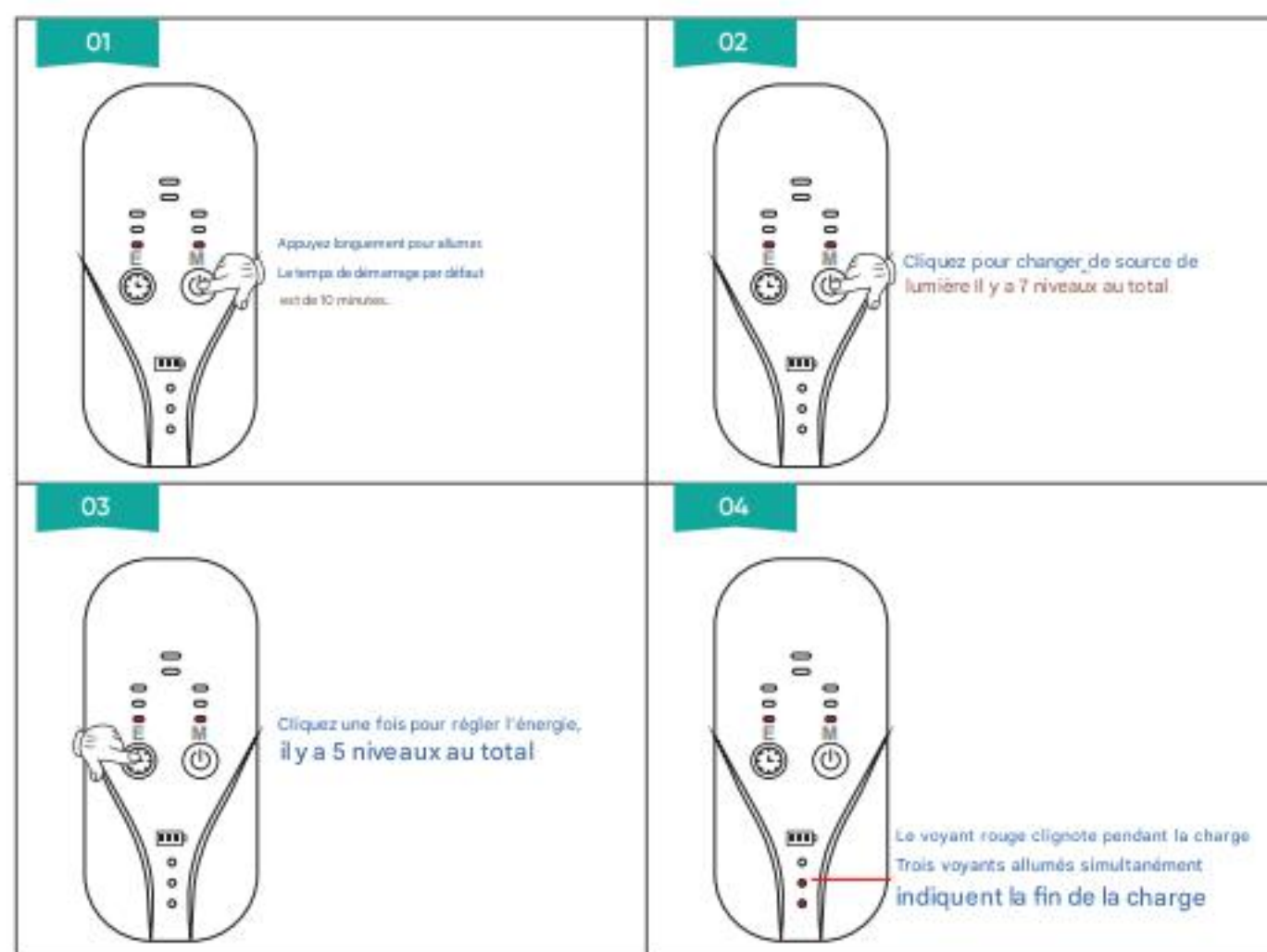

Test de sensibilité à la lumière

Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez effectuer un test de sensibilité à la lumière :

1. Placez l'appareil sur votre bras, allumez l'interrupteur et faites briller pendant 10 minutes.

Si des symptômes tels que des rougeurs cutanées ou des démangeaisons apparaissent, vous avez peut-être la peau sensible à la lumière. Il est alors recommandé d'arrêter de l'utiliser ou de consulter une esthéticienne avant de l'utiliser à nouveau.

2. Avant utilisation, veuillez nettoyer votre visage et le garder au sec (sans maquillage pour éviter les ingrédients photosensibles qui peuvent être contenus dans les cosmétiques et affecter l'efficacité des soins de la peau.

3. Après utilisation, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau, ce qui est une réaction normale de la peau et reviendra à la normale dans un délai de 1 à 2 heures.

Si vous ressentez une sensation de brûlure ou tout autre inconfort pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation.

Instructions de chargement :

1. Ce produit contient des batteries lithium-ion polymère et ne doit pas être utilisé pendant la charge (Remarque : une fois utilisé pendant la charge, il endommagera la batterie et l'équipement, et l'instrument ne s'allumera pas ou ne fonctionnera pas)
2. Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil. Lors du chargement, connectez le câble de chargement USB au contrôleur, branchez la prise, allumez l'appareil et démarrez le chargement.
3. Lorsque le voyant du contrôleur clignote, l'appareil est en état de charge ; lorsque le voyant du contrôleur est éteint, cela indique que la charge est terminée.

Conseils

Avant utilisation, veuillez irradier le visage pendant 1 minute, aucun symptôme d'inconfort ne peut continuer à utiliser.

Commencez à utiliser le produit à faible vitesse, développez la tolérance cutanée et choisissez le niveau d'énergie en fonction de l'état réel de la peau. N'augmentez pas aveuglément la durée et la fréquence de la lumière, vous devez ajuster la durée de la lumière en fonction de l'état réel de la peau. Il est recommandé d'utiliser ce produit 3 à 5 fois par semaine, la durée d'utilisation unique étant de 20 minutes. Une fois les résultats visibles, réduisez le temps d'utilisation à 2 à 3 fois par semaine.

▲ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
- Veuillez ne pas plier le compteur de masque pour le ranger, sinon cela endommagerait les fils à l'intérieur.

INTRODUCTION À L'ÉCLAIRAGE

Lumière rouge (630 nm) :

Connu sous le nom de « lumière bioactive », il peut améliorer l'activité cellulaire, accélérer le métabolisme et favoriser la formation de collagène, avec des taches blanchissantes et lumineuses, un rajeunissement de la peau et une élimination des rides, augmenter l'élasticité de la peau, améliorer l'état de la peau, réparer la peau endommagée, réduire les pores et resserrer la peau, effets anti-âge et antioxydants.

Lumière bleue (460 nm) :

Il peut détruire efficacement *Propionibacterium* et d'autres bactéries sans endommager les tissus cutanés et réduire l'inflammation de l'acné pour guérir en peu de temps. Il est efficace pour éliminer l'acné, la stérilisation et l'anti-inflammation, réparant la peau sans laisser de marques d'acné ni de pigmentation.

Lumière verte (520 nm) :

Neutralisant et équilibrant, il peut réduire la sécrétion d'huile cutanée, équilibrer le rapport eau/huile, soulager efficacement les tensions mentales, le drainage lymphatique et les œdèmes.

Lumière violette (630 nm + 460 nm, lumière à double fréquence rouge et bleue) :

Améliore l'échange d'oxygène cellulaire, donne aux cellules de la peau la possibilité de reconstituer l'énergie, décompose les pigments, favorise la détoxification lymphatique, améliore la rugosité de la peau, les rides, traite les rougeurs et la fièvre de la peau, la mousse, etc., renforce l'immunité.

Lumière jaune (520 nm + 630 nm, lumière double fréquence verte + rouge) :

Il combine l'efficacité de deux types de luminothérapie, notamment dans le traitement de l'acné et des cicatrices d'acné, et a un effet particulièrement efficace et réparateur.

Lumière cyan (520 nm + 460 nm, lumière double fréquence verte + bleue) :


Il peut progressivement améliorer l'énergie cellulaire et a un très bon effet sur le métabolisme.

Lumière blanche (460+520+630, lumière triple fréquence bleue + verte + rouge) :


Pénètre profondément dans la peau, accélère le métabolisme des tissus actifs, décompose la pigmentation, améliore les ridules et le relâchement cutané.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom	Appareil de beauté à LED pour rajeunissement de la peau par photons		
Nombre de perles de lampe	210+99 LED de haute qualité		
Tension de charge	5 V 0,5 A		
Temps de charge	4-5 heures		
Poids net	212g		
Capacité de la batterie	1200mAh		
Fabriqué en Chine	    		

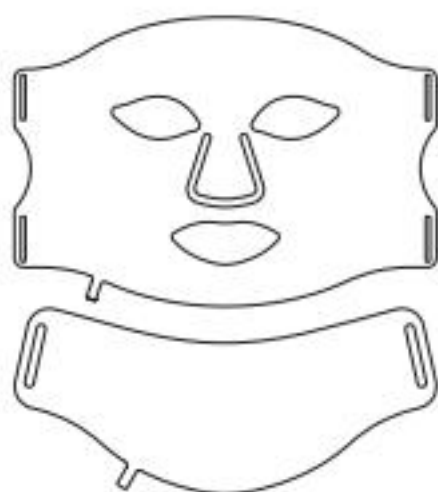


- Instrument de beauté x 1
- Sangle de fixation x 4

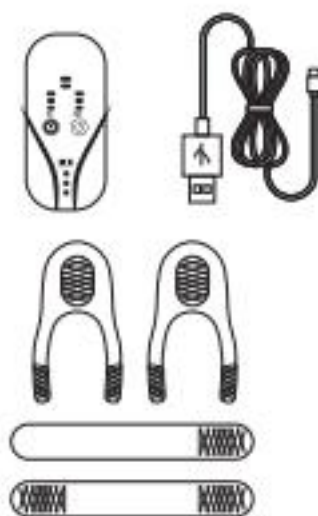

- Protection oculaire x 2
- Câble de chargement x 1



- Manuel x 1
- contrôleur x 1

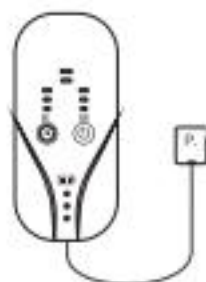

Le voyant de l'écran clignote pour indiquer la charge, et le voyant s'allume pour indiquer que la charge est terminée.

A Veuillez charger le contrôleur lorsque l'instrument et le contrôleur ne sont pas reliés. Et n'utilisez jamais l'appareil pendant qu'il est en charge !