

MANUEL D'UTILISATION

Système d'épilation IPL pour A113



Afin de garantir votre sécurité lors de l'utilisation, veuillez lire ce manuel d'utilisation et prêter une attention particulière à toutes les informations de sécurité et les suivre strictement avant utilisation.

AVANT-PROPOS

Le principe de fonctionnement de l'instrument d'épilation : irradier le follicule pileux en émettant des photons.

Après une période d'irradiation, le follicule pileux va progressivement rétrécir et finalement atteindre l'objectif d'une épilation permanente.

L'instrument est destiné au follicule pileux, pas aux cheveux, mais au follicule pileux. Aucun effet lors de l'utilisation au début. Vous devez suivre la procédure pendant plus de 20 jours pour constater une croissance lente des poils. En général, 3 à 4 mois d'inspection peuvent permettre une épilation à long terme.

Note:

1. Si les poils dépassent 8 mm, rasez-les d'abord. S'ils ne dépassent pas 8 mm, l'irradiation directe est la meilleure solution.
2. Gardez la peau sèche et propre avant d'utiliser l'instrument. Il est interdit d'utiliser du gel d'aloë vera, du lait corporel et d'autres liquides avant de l'utiliser, car cela empêcherait l'instrument de briller. Utilisez le gel d'aloë vera pour l'entretien après 1 heure d'utilisation.
3. Commencez avec la vitesse la plus basse et trouvez la vitesse qui vous convient.

1. Conseils de sécurité

Veuillez lire attentivement ces précautions de sécurité et suivre le manuel d'utilisation. Elles visent à garantir le bon fonctionnement et la sécurité du produit, à éviter que les utilisateurs ou d'autres personnes ne subissent des blessures corporelles ou des dommages matériels. Veuillez donc vous assurer de les respecter.

Contre-indications

Il est déconseillé aux mineurs et aux enfants de moins de 18 ans de l'utiliser, car l'appareil n'a pas été testé sur ces personnes.

Il est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes qui essaient de tomber enceintes ou qui allaitent de l'utiliser. L'appareil n'a pas été testé sur les femmes en période de gestation et d'allaitement. Les changements hormonaux peuvent augmenter la sensibilité de la peau ou la probabilité d'inconfort cutané.

Il est déconseillé aux personnes ayant des antécédents d'allergies légères ou allergiques de l'utiliser.

Si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de tumeurs cutanées potentiellement malignes, il n'est pas suggéré d'utiliser ce produit, car cet appareil n'a pas été testé sur ces personnes.

N'utilisez pas l'appareil si les personnes souffrent de l'une des maladies suivantes :


1. Les personnes souffrant d'épilepsie ou d'épilepsie photo-induite ou de migraines chroniques, car la luminescence énergétique entraînera de graves douleurs ou des symptômes de migraine.
2. Les personnes souffrant d'hémorroïdes, de psoriasis, d'eczéma, de coups de soleil, d'herpès simplex ou ayant des parties du corps avec des vulve ou des érythrocytes, les situations ci-dessus rendront la peau sensible à la lumière et augmenteront la probabilité d'inconfort cutané.
3. Les personnes dont le corps est doté d'instruments implantés tels qu'un stimulateur cardiaque, un dispositif d'incontinence, une pompe à insuline, etc., l'appareil n'a effectué aucun test sur ces groupes, par conséquent, sa fonction pour eux est indéterminée.

2. Présentation du produit

2.1 Liste de colisage :

Machine IPL, adaptateur secteur, manuel d'instructions (ensemble de base).

2.2 Description de la structure.

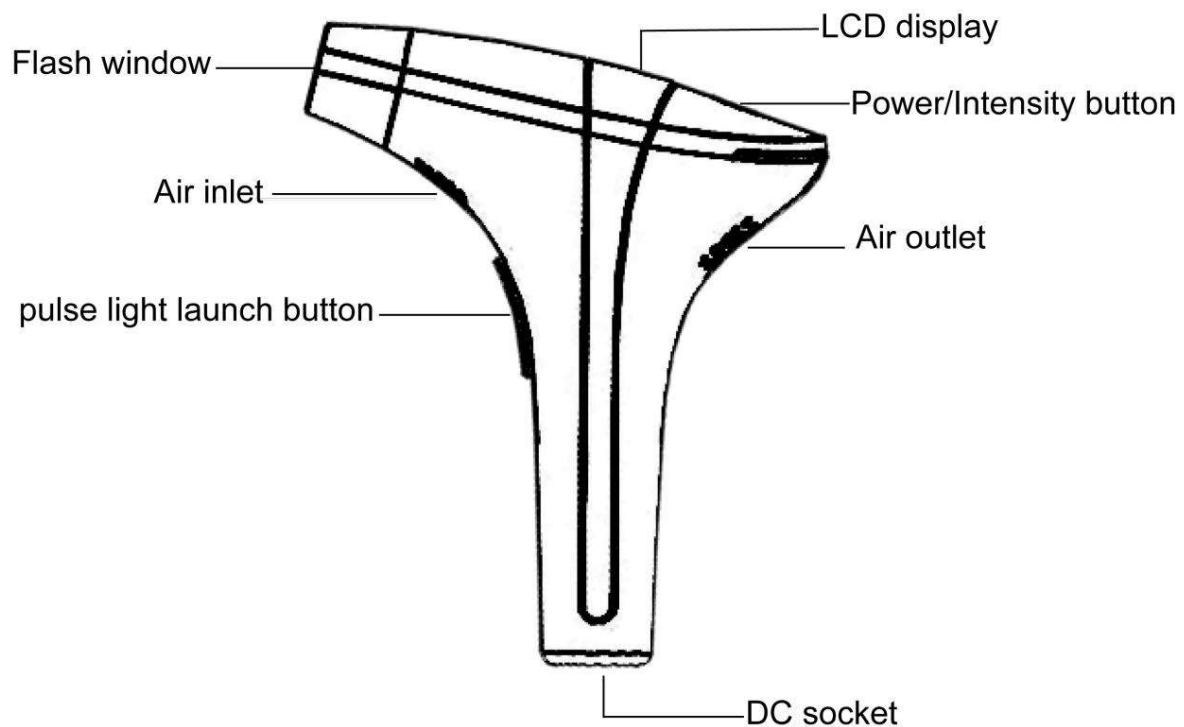

3. Paramètres techniques

Tube de lampe	Tube à quartz au xénon
Source de lumière	Lumière pulsée intense
Fréquence énergétique	1,5-3,9J/cm ²
Taille de la mise au point	4c
Longueur d'onde	470 nm à 1 100 nm
Durée de vie du tube de lampe	900000 fois
Adaptateur	CA 100-240 V à 12 V CC 3 A
Poids	268g (machine)
Taille du paquet	185x151x78mm
Plage de température de fonctionnement	5-30
Plage d'humidité de fonctionnement	Humidité relative 30%--60%

4. Introduction aux fonctions

Épilation et rajeunissement de la peau

Ce produit peut être utilisé pour : les poils en excès tels que les poils des lèvres, les poils des aisselles, les poils du corps des membres, le front

L'épilation indolore convient aux cheveux noirs et aux personnes aux cheveux foncés, elle ne convient pas aux cheveux blancs

gris ou blond (référez-vous à la carte de contraste de couleurs suivante).

couleur de peau Couleur des cheveux	Blanc	Jaune	Moyen brun	Lumière marron	Marron	Brun foncé/ Noir
Blanc/Gris	×	×	×	×	×	×
Rouge	×	×	×	×	×	×
Or clair	×	×	×	×	×	×
Brun clair	√	√	√	√	√	×
Brun	√	√	√	√	√	×
Brun foncé	√	√	√	√	√	×
Noir	√	√	√	√	√	×

5. Mode d'emploi

5.1 Utilisez un rasoir pour nettoyer les poils de surface de votre peau (si les poils mesurent plus de 8 mm).

5.2 Utilisez une lingette imbibée d'alcool médical pour nettoyer la fenêtre du flash.

5.3 Appuyez sur le « bouton d'alimentation » pendant 2 à 3 secondes, il démarrera et entrera en état de fonctionnement.

Note:

A. Vous verrez que le voyant blanc est allumé après le démarrage.

B. Déplacez la fenêtre du flash sur votre peau (90 degrés perpendiculairement à la peau), vous verrez la lumière blanche scintillement, il y a un capteur d'induction du corps humain intégré.

C. L'indicateur lumineux blanc doit clignoter, sinon l'appareil ne fonctionnera pas. Si vous constatez que le la lumière blanche ne scintille pas, rapprochez-la de votre peau jusqu'à ce qu'elle scintille.

5.4 Cliquez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le niveau d'intensité approprié (8 niveaux, indiqués sur l'écran) écran.) Le diagramme ci-dessous montre le niveau d'intensité de faible à élevé. Tout réglage peut être effectué dans la séquence affichée avec un clic sur le bouton d'alimentation.

5.5 Une fois le niveau d'intensité réglé, déplacez la fenêtre du flash vers la peau qui peut couvrir la fenêtre du flash complètement, vous pouvez voir l'indicateur d'alimentation clignoter et cliquer sur le bouton flash, puis il clignotera. Après à chaque opération de flash, le voyant lumineux s'éteint pour charger l'alimentation, après 1 à 3 secondes, le voyant s'éteint revenir pour indiquer qu'il est à nouveau prêt à être utilisé.

5.6 Le mode par défaut est le mode manuel, appuyez sur le « bouton flash » pendant 2 secondes pour entrer dans le modèle automatique (« A » (Appuyez sur le bouton « flash » pour revenir au modèle manuel (« A » disparaît).

Note:

Pour des résultats parfaits, il est suggéré de répéter le processus d'épilation 2 à 3 fois et de s'assurer que tout le les parties du corps ne doivent pas être répétées ni omises.

5.7 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'éteindre.

5.8 Une fois l'utilisation terminée, veuillez nettoyer la fenêtre du flash à l'aide de la lingette humide imbibée d'alcool médical suggérée (après une utilisation fréquente, il y aura une tache blanche de rosée à l'intérieur de la lentille, cela n'affectera pas l'utilisation normale et la durée de vie de l'instrument).

5.9 Une fois l'épilation terminée, il est préférable de refroidir la peau avec de l'eau glacée ou une serviette froide et humide.

6.0 Utilisez un tonique pour aider votre peau à conserver son hydratation après l'épilation.

Note:

A. Il est fortement conseillé de vérifier les réactions indésirables en effectuant un test cutané 2 heures avant toute procédure d'épilation.

Méthode d'essai :

Sur une petite zone de peau à l'intérieur du bras supérieur (le milieu). D'une faible énergie à une énergie élevée 1 à 2 fois au même endroit. Après 2 heures, si vous ressentez des rougeurs, des brûlures, des douleurs lancinantes ou d'autres symptômes, consultez un médecin avant de réutiliser.

B. Ne pas utiliser plusieurs fois sur la même partie de la peau. Vous devez flasher moins de 2 fois de suite au même endroit. Les temps de fréquence de fonctionnement doivent être réduits lors de l'utilisation d'un niveau d'intensité énergétique élevé.

Couleur de peau Parties	Blanc	Jaune Moyen	brun	Brun clair	Brun	Brun foncé /Noir
Armpit	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 5-7 2-3 fois	Niveau 4-6 2-3 fois	Niveau 1 à 4 2-3 fois	Inapplicable
Bras	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 5-7 2-3 fois	Niveau 1 à 4 2-3 fois	Niveau 1 à 4 2-3 fois	Inapplicable
Jambe	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 5-7 2-3 fois	Niveau 1 à 4 2-3 fois	Niveau 1 à 4 2-3 fois	Inapplicable
Autour de la bouche	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 4-6 2-3 fois	Niveau 1 à 4 2-3 fois	Niveau 1-3 2-3 fois	Inapplicable
Affronter	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 6-8 3-4 fois	Niveau 4-6 2-3 fois	Niveau 1 à 4 2-3 fois	Niveau 1-3 2-3 fois	Inapplicable

Note:

A. Utiliser 6 à 10 fois comme cycle d'épilation.

B. Utiliser une fois toutes les 2 semaines jusqu'à 6 fois.

C. Utiliser une fois toutes les 4 semaines en utilisant 6 à 10 fois.

D. Si vous trouvez de nouveaux cheveux fins après l'avoir utilisé, opérez une fois tous les 2 à 3 mois à cet endroit et continuez à obtenir des résultats satisfaisants.

E. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est suggéré d'utiliser plusieurs fois la zone aux cheveux épais.

F. L'utilisation varie d'une personne à l'autre, utilisez moins fréquemment lorsque la zone pileuse pousse légèrement, environ 30 %.

6. Précautions

- A. N'utilisez pas le flash à proximité ou directement sur les yeux.
- B. Après l'opération, certaines rougeurs cutanées sont normales, vous pouvez refroidir la zone avec de l'eau glacée ou une serviette froide et humide.
- C. Ne pas utiliser en conjonction avec d'autres produits cosmétiques tels que des produits à base de gel aqueux.
- D. Plus votre peau est foncée, la réaction peut ne pas être aussi apparente et la réaction peut être retardée, dans ce cas, assurez-vous que la période d'attente de 2 heures est respectée avant d'augmenter le niveau d'intensité.
- E. Continuez à prendre soin de votre peau en l'hydratant et en utilisant une crème solaire.
- F. Évitez les rayons UV pendant l'utilisation et protégez toujours votre peau lorsque vous êtes exposé au soleil. Essayez également d'éviter une longue exposition aux rayonnements de l'ordinateur lorsque vous travaillez.
- G. Ne bloquez pas l'entrée d'air et la sortie de refroidissement.
- H. Les cheveux collés à l'appareil peuvent provoquer des taches blanches, mais cela n'affecte pas les performances de l'appareil et son utilisation normale.
- I. À la fin de la vie, la paroi intérieure de l'ampoule apparaîtra à différents degrés de phénomène noir, c'est le résultat du processus de vieillissement normal des tubes, ne vous inquiétez pas et continuez à l'utiliser normalement.
- J. Le produit n'est pas étanche.
- K. En cas de défaut, débranchez immédiatement l'appareil.
- L. Ne stockez pas l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants, ni dans des endroits humides, poussiéreux ou à haute température.
- M. Éviter tout dommage et tenir hors de portée et de vue des enfants.
- N. Interdire l'utilisation avec d'autres applications qui ne sont pas autorisées.
- O. Interdire à d'autres personnes d'ouvrir l'appareil, à l'exception de nos personnes autorisées, sinon il peut y avoir un risque de choc électrique.

Suivi

Effets secondaires possibles

Si vous utilisez l'IPL conformément aux instructions d'utilisation, les effets secondaires sont rares. Cependant, toute procédure esthétique, y compris l'utilisation d'appareils à usage domestique, peut entraîner certains effets secondaires. Si l'un des états suivants (voir le tableau des effets secondaires ci-dessous) apparaît et dure plus de 24 heures, vous devez consulter votre médecin ou votre dermatologue.

Tableau des effets secondaires :

Degré des effets secondaires	Effets secondaires
Effets secondaires mineurs	Irritation
	Rougeur
	Sensibilité au soleil
Effets secondaires rares	Brûlures
	Cicatrices
	Changements de pigmentation
	Rougeurs excessives
	Gonflement
Effet secondaire extrêmement rare	Infection
	Ecchymoses