


Oreiller de massage en forme de U

Instructions d'utilisation des produits

Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et leurs spécifications sans préavis

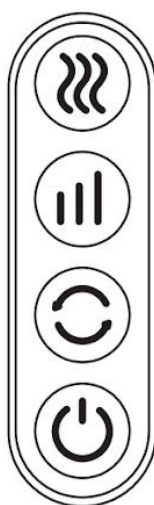

Sélection des fonctions

Liaison forte et liaison faible

Positif / inverse

Démarrage par un bouton



Liaison forte et liaison faible

Voyant rouge


Démarrage par un bouton




Démarrage par un bouton

Configuration du produit


Votre oreiller en forme de U comprend : l'unité principale, un câble de chargement, un manuel d'instructions, un certificat, une carte de garantie

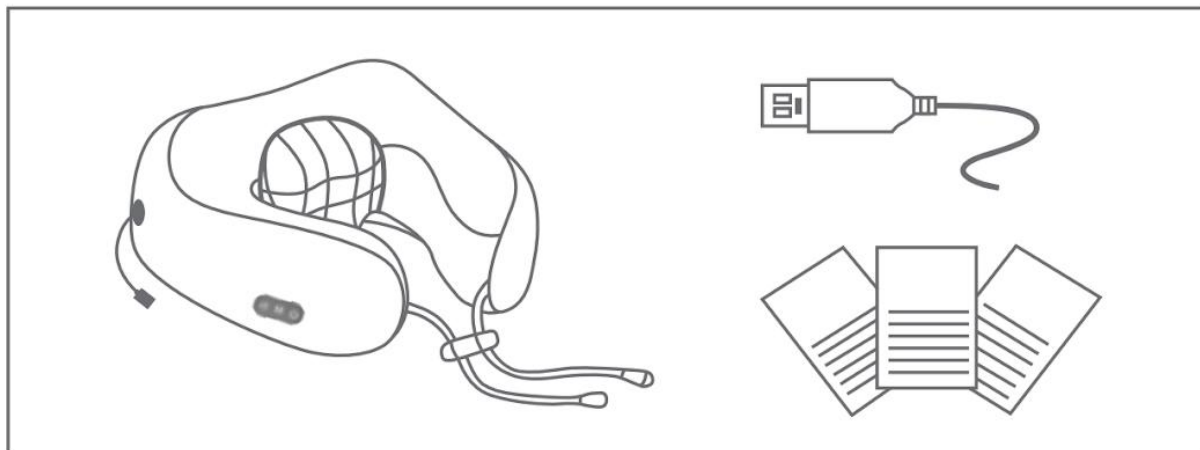


Type de pétrissage

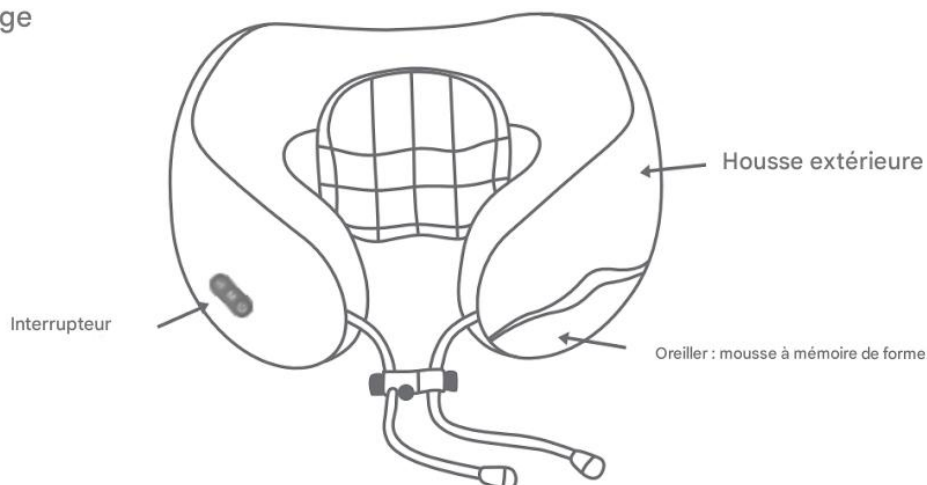

Conception à boucle en corde

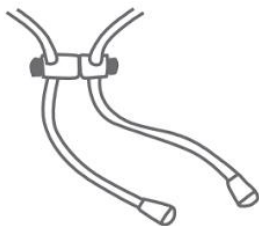

Appuyez sur le bouton de déverrouillage

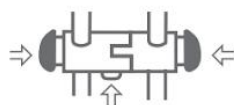

Appuyez vers le haut et vers le bas pour desserrer

Merci d'avoir choisi ce produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Veuillez le conserver en bon état pour toute question ultérieure.

Efficacité du produit

Soulage la fatigue et les douleurs musculaires
Libère les tensions
Favorise la relaxation physique et mentale

Favorise la circulation sanguine
Réduit la fatigue et l'épuisement
Améliore l'état de santé de la colonne cervicale

Description des paramètres

Nom du produit : MassEUR de vertèbres cervicales
Puissance nominale : 3,7 W
Minuterie automatique : environ 15 minutes

Tension de charge : Tpcy-c
Poids net : 495 g

Mode d'utilisation

Utilisation à trois touches

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes pour démarrer le masseur.
2. Après le démarrage, le mode pétrissage + chauffage est activé. Appuyez sur la touche « M » pour contrôler la fonction de chauffage.
3. En fonctionnement, appuyez sur la touche « » pour régler la force de pétrissage (trois niveaux disponibles).
4. Maintenez la touche « » enfoncée pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Utilisation à quatre touches

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes pour démarrer le masseur et le mettre en marche.
2. Après le démarrage, le mode de fonctionnement est le pétrissage, le chauffage et la vibration.
3. En fonctionnement, appuyez sur la touche « || » pour régler la force de pétrissage (trois niveaux au total).
Appuyez sur « 0 » pour inverser le sens du pétrissage et du massage, et sur « » pour régler l'intensité de la vibration.
Il existe trois niveaux d'intensité au total.
4. Maintenez la touche « » enfoncée pendant 2 secondes, puis éteignez l'appareil.

Problèmes courants et dépannage

Numéro de série	Problème	Cause possible	Solution
1	Le masseur ne démarre pas	Batterie déchargée pendant la veille	Il peut être redémarré normalement après la charge.
2	Le masseur s'arrête de fonctionner	Le programme de massage est terminé ou la batterie est déchargée	Rouvrez l'interrupteur de la batterie

Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur local pour le service de réparation

Utilisez la prise et le cordon d'alimentation

1. Veuillez vérifier que la tension correspond aux spécifications du produit.
 2. N'utilisez pas d'autres accessoires similaires à la place des accessoires de ce produit.
 3. Ne touchez pas l'alimentation ou la prise avec les mains mouillées afin d'éviter tout dysfonctionnement ou choc électrique.
 4. Ne chargez pas le produit lorsque la tension est instable.
-

N'utilisez pas ce produit dans les conditions suivantes :

1. Le masseur est anormal et l'appareil de massage est endommagé.
 2. En cas de douleur grave ou intense pendant le massage, arrêtez immédiatement le massage et consultez un médecin.
 3. Dans le cas ci-dessus, s'il est confirmé que le produit est la cause du problème, veuillez l'envoyer au centre de réparation pour inspection et entretien.
-

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire tous les documents et suivre les instructions ci-dessous :

1. Ne placez pas le produit dans la salle de bain ou dans un endroit humide.
 2. Ne laissez pas le masseur exposé directement au soleil ou à des températures élevées pendant une période prolongée
 3. Si le produit est utilisé par des enfants, des personnes handicapées physiques ou mentales, il doit être accompagné et guidé par un tuteur.
 4. Ce produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée. Veuillez vous en débarrasser conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre ville.
-

Ce produit ne convient pas à l'utilisation.

Si vous souffrez de l'une des affections suivantes, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.

1. Être sous traitement médical ou souffrir d'inconfort physique.
 2. Patients souffrant d'une affection aiguë ou soudaine.
 3. Utilisateurs ayant consommé de l'alcool.
 4. Mineurs, adolescents et enfants.
-

Utilisation et recharge de la batterie

1. En utilisation normale, la durée de vie de la batterie rechargeable est de 2 500 cycles de charge et de décharge.
2. Lorsque la batterie rechargeable n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sa durée de vie diminue. Il est recommandé de la recharger au moins 1 à 2 fois par mois

Service de garantie

Cher client, merci de votre soutien. Les produits que vous avez achetés sont fabriqués sous un contrôle de qualité strict et un processus d'inspection standard. Cette carte de garantie concerne les pannes du produit dans des conditions normales d'utilisation. Conformément à la carte de garantie, des réparations et des services sont fournis aux clients.

Description de la garantie

1. À compter de la date d'achat, en cas de dysfonctionnement dans des conditions normales d'utilisation, vous bénéficiez d'un an de service de garantie gratuit, à l'exception des dommages (tels que : démontage incorrect des pièces, dommages dus à une mauvaise manipulation, etc.), des dommages naturels (tels que : incendie, tremblement de terre, inondation), des dommages causés par des rongeurs, etc., qui ne sont pas couverts par cette garantie.
2. Si la carte de garantie est perdue et ne sera pas réémise, veuillez la conserver en lieu sûr.
3. Aucun service de garantie gratuit n'est fourni en cas de dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation par le consommateur.
4. Si le produit a expiré pendant la période de garantie, si la société dispose encore d'accessoires, un service de garantie sera fourni, et certaines pièces et frais de manutention seront facturés.
5. Cette carte de garantie est valable uniquement sur le territoire de la République de Chine

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie

1. Utilisation non conforme aux instructions et non interdites
2. Absence de facture ou de reçu d'achat, absence de certificat de garantie valide, produits contrefaits ou défectueux
3. Retour du produit avec un emballage incomplet, des accessoires manquants, ou après démontage, réparation par l'utilisateur, etc.
4. Dommages causés par des facteurs humains, tels que frottement, immersion, choc violent, etc.
5. Le produit affecte la revente du vendeur pour des raisons humaines
6. Les informations inscrites sur la carte de garantie ou la carte de garantie ne correspondent pas au produit réel

Carte de garantie

Merci d'avoir acheté nos produits.
Nous respecterons scrupuleusement le contrat pour remplir la garantie, mais des frais seront facturés le cas échéant dans les circonstances suivantes :

1. Dommages causés par le non-respect des instructions du manuel d'utilisation
2. Dommages causés par un cas de force majeure
3. Expiration de la garantie gratuite

Nom du produit :
Numérotation :
Date d'achat :
Acheteur :
Date de garantie :

Certificat de conformité

Numéro de contrôle : contrôle 01

Date de production :

Norme exécutive : GB4706.1-2005

GB4706.10.2008