


Structure du produit

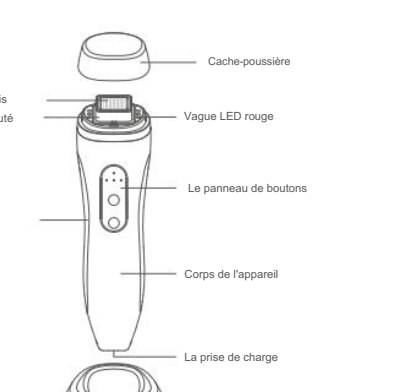


Mode d'emploi

- Nettoyez les pièces qui nécessitent un entretien.
- Appliquez la quantité appropriée de gel ou d'essence sur les parties nécessitant des soins.
- Appuyez sur le bouton « ON/OFF ». Allumez l'appareil RF. L'indicateur L est vert et lumineux. Démarrez en mode faible par défaut.
- Appuyez sur la touche MODE pour régler le niveau d'énergie. (Veuillez tester la sensation à l'intérieur du bras avant la première opération et choisissez la vitesse appropriée en fonction du degré de stimulation et de chaleur que vous pouvez recevoir.)

Appuyez une fois sur le bouton MODE, le voyant M est vert et lumineux, et le MODE moyen démarre ; Appuyez à nouveau sur le bouton MODE, le voyant H est vert et lumineux, et le MODE haut de gamme démarre.

- Après avoir sélectionné l'équipement approprié, la tête de beauté touchera la peau et l'induction des ondes lumineuses RF s'activera automatiquement.
- Une fois l'allaitement terminé, appuyez sur le bouton (ON/OFF), fermez l'appareil à radiofréquence et nettoyez la tête de beauté pour la prochaine utilisation.

Charge de la batterie

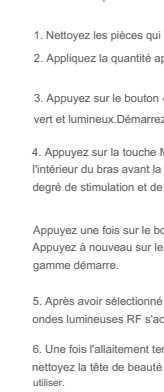

Pratique infirmière courante

- Technique de lifting du visage : maintenez la tête près de votre visage pendant un moment, puis déplacez-la vers le reste de votre visage et répétez jusqu'à ce que vous ayez terminé. (figure 1)
- Compétence de pression sur les points : Maintenez la tête près de votre visage pendant un moment, puis déplacez-la vers le reste de votre visage et répétez jusqu'à ce que vous ayez terminé. (figure 2)
- Importation de compétences : Appliquez l'essence de soin de la peau sur la tête de beauté, déplacez-vous d'avant en arrière en cercles le long de la texture de la peau. Dans le processus de déplacement de la tête de beauté, maintenez une certaine quantité de force pour que la peau et la tête de beauté soient proches. (figure 3)