


106mmx148mm

HEATED KNEE BRACE

USER MANUAL

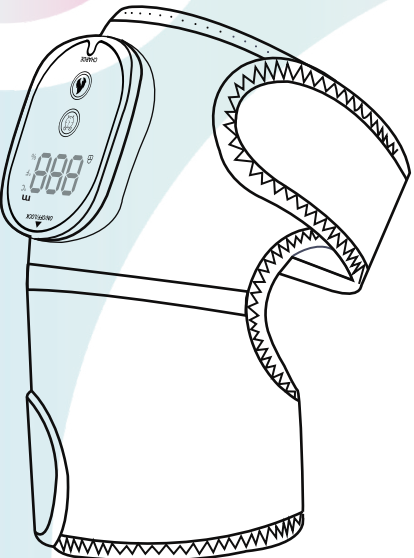

MODEL: HLX102286/HLX10228601

Please read this manual carefully before use. After reading, please keep the manual properly for future reference.

Thank you for purchasing this product

Product Description

This heated knee brace is light, soft and breathable, comfortable to wear and safe to use. Our knee brace is ergonomically designed with extension straps for knees, elbows and shoulders. It can improve blood circulation, relax muscles, relieve physical fatigue, joint pain and discomfort.

NOTE:


Knee braces may relieve pain and discomfort, but are not therapeutic.

Product Parameters

Product Name	Heated Knee Brace
Working Voltage	5V
Charging Current	1500mA
Charging Time	2H
Battery Capacity	3000mAh

- 1 -

BUTTON DESCRIPTION

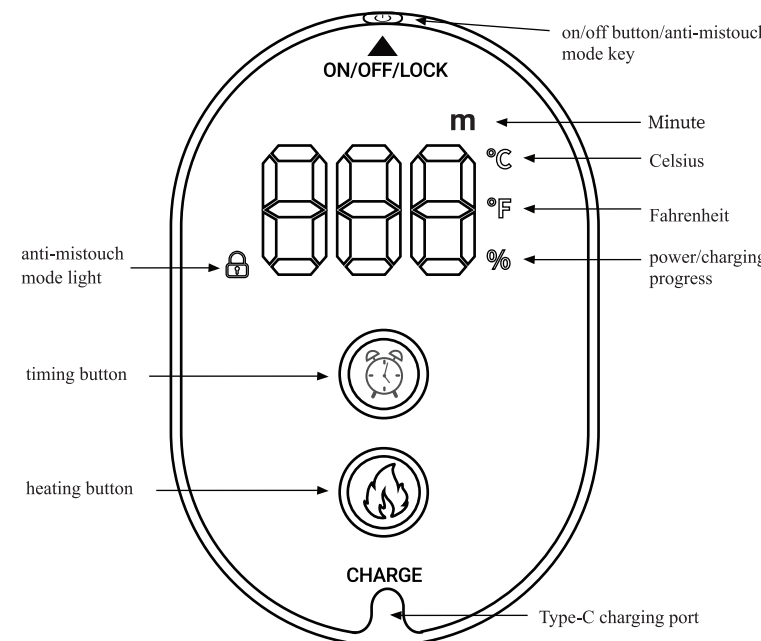


NOTE:

The numbers on the controller screen indicate heating temperature (°C/°F), charging progress (%) and timing time (m).

- When the product is in use (non-charging state), the number indicates the heating temperature.
- During use, the anti-mistouch mode light is on, °C is on, the number represents the current power, and jumps back to % after a few seconds, and the number again represents the current heating temperature.
- When the timing function is used, the green light of m is on, and the number indicates the set time.
- When the product is in the charging state, the number represents the charging progress; when fully charged, the screen will display "FU".

- 2 -

APPLICABLE TO MULTIPLE PARTS

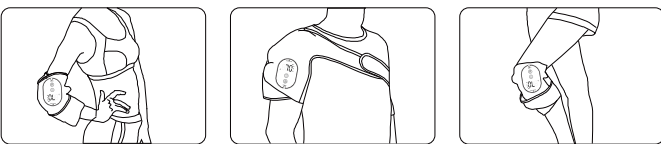

OPERATION GUIDE

1. Power On

Long press the power key to power on. If it cannot be turned on normally, it may be due to insufficient power, please try again after charging.

2. Wear

Secure the knee brace at the knee/elbow/shoulder position.

3. Heating Function

Click [°C] to turn on the heating function, and the system will automatically set it to the first gear, 45°C. There are six heating gears: 45°C<50°C<55°C<60°C<65°C<70°C. Click [°C] again to switch the heating gear, and the heating gear will be switched cyclically from low to high temperature.

NOTE: After the heating function is turned on, the temperature will rise slowly and will not directly jump to the temperature you set. When you set the temperature level, the temperature will stop rising or falling after rising to the level you set.

4. Timing Function

Click [m] to start the first gear of the timing function: 15 minutes timing. The timing function has three gears: 15min<30min<45min. Click [m] again to switch the timing of 30min and 45min in turn. Click [m] fourth time, the screen will display 0min, which means that the timing function is turned off. If you want to turn on the timing function, click [m] again.

- 3 -

5. Anti-mistouch Touch Mode

After setting the temperature level and timing level, short press the switch button, [m] will light up, and the anti-mistouch function will be turned on. At the same time, °C lights up, the number represents the current power, and jumps back to % after a few seconds, and the number again represents the current heating temperature. You cannot operate the controller at this time to prevent accidental button touches during product use.

If you want to operate the controller, please short press the power button to turn off the anti-mistouch mode. At this time, [m] turn off.

6. Switch Between °C and °F

Long press [°C] and [°F] for two seconds at the same time, the temperature unit will switch from °C to °F.


7. Turn Off

After use, long press the power button to turn off the knee brace. (If you set the timing function, the machine will automatically shut down when the time is over, without your manual operation.)

8. Storage

Keep the knee brace, extension straps and charging cable securely together so you don't lose accessories.

ABOUT CHARGING

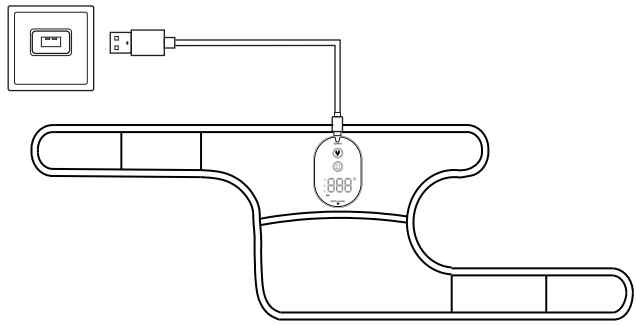

- 4 -

- When the screen shows that the power is lower than 20%, please charge it in time.
- Please make sure the knee brace is turned off before charging.
- Take out the equipped charging cable, insert it into the Type-C interface of the controller, and connect the USB interface of the charging cable to the charging device.
- The display screen of the controller lights up, indicating that the knee brace has started charging, and the number represents the current power. During the charging process, the number will slowly increase, indicating the charging progress.
- The display screen of the controller displays "FU", indicating that the knee brace is fully charged.

NOTE:

Do not operate the controller during charging. Our knee brace cannot be used while charging.

PRECAUTIONS

- Wear thin clothes when using, such as shirts or yoga clothes; do not wear thick clothes, too thick clothes may affect the effect.
- Do not wear this product directly on your body (without the barrier of clothes), it will burn your skin.
- It is not recommended to use the high temperature gear for a long time (may cause burns or skin damage).
- Do not expose the knee brace to sunlight or fire, so as not to damage the thermal conductor of the insulation.
- Do not disassemble or modify the heating foil and control circuit, so as not to cause artificial damage to the heating element.

SAFETY PRECAUTIONS

- When starting to use this product, it is recommended to select the low temperature mode. Slight skin redness and fever after use are normal. However, if severe skin redness or swelling occurs after use, discontinue use immediately and consult a doctor.
- It is recommended to avoid direct contact with the skin. When the product is used for a long time, its temperature is very high. Be careful of burns.
- It is recommended to start from the lowest temperature and gradually adjust to an appropriate temperature according to individual conditions to avoid skin burns for people who are not sensitive to heat.
- If the user has any discomfort during use, such as dizziness, headache, asthma, etc., please stop using it immediately and analyze the cause of the discomfort.
- When not in use, please turn off the knee brace and store it properly.
- This product is a household appliance and cannot replace medical equipment or medicine.
- Please pay attention to operating in accordance with the instructions, and regular operation may lead to safety accidents or property damage.

- 5 -





⚠ WARNING

CONSULT A DOCTOR BEFORE USE:

- Patients suffering from osteoporosis, fractures, sprains, acute pain and other leg diseases;
- Patients with nerve disorders in the legs or sensory disturbances in the skin;
- Pregnant or postpartum women;
- Heart disease patients;
- The product has a heating function, people who are not sensitive to temperature must pay attention.

ABOUT CLEANING


- Before cleaning, please make sure to turn off the power completely.
- When cleaning, wipe the knee brace with a damp cloth, but be careful not to wet the controller part. Do not use strong cleaners or hard brushes.
- Lay flat to dry.
- This product does not support machine wash or hand wash.
- Do not dry clean to avoid damage to the heating element.

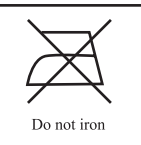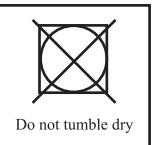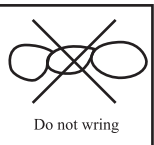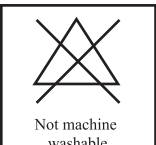

- 6 -

GENOUILÈRE CHAUFFANTE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

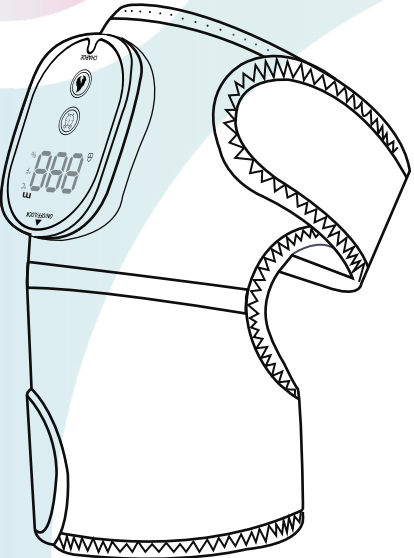

MODÈLE: HLX102286/HLX10228601

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Après l'avoir lu, conservez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Merci d'avoir acheté ce produit

Description du Produit

Cette genouillère chauffante est légère, douce et respirante, confortable à porter et sûre à utiliser. Notre genouillère est conçue de manière ergonomique avec des sangles d'extension pour les genoux, les coudes et les épaules. Elle peut améliorer la circulation sanguine, détendre les muscles, soulager la fatigue physique, les douleurs articulaires et l'inconfort.

REMARQUE:


Les genouillères peuvent soulager la douleur et l'inconfort, mais ne sont pas thérapeutiques.

Paramètres du produit

Nom du Produit	Genouillère Chauffante
Tension de Fonctionnement	5V
Courant de Charge	1500mA
Temps de Charge	2H
Capacité de la Batterie	3000mAh

- 1 -

DESCRIPTION DU BOUTON

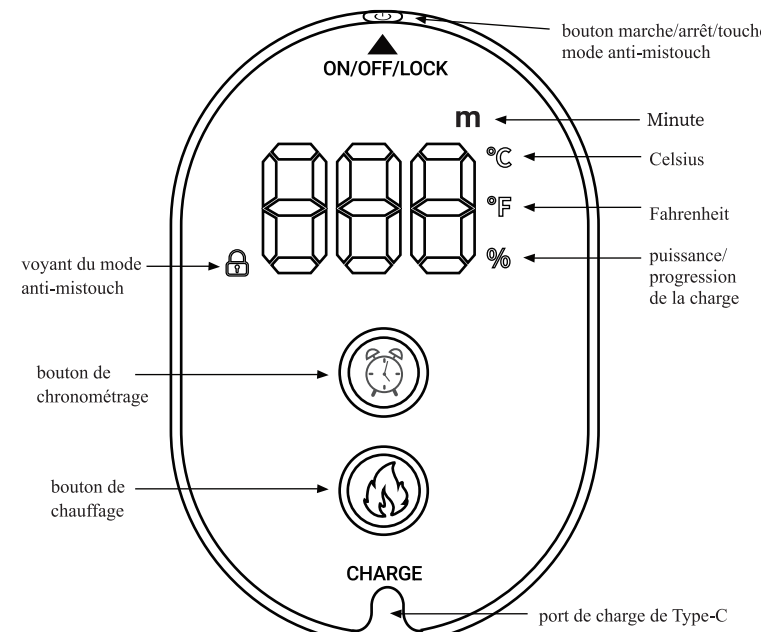


REMARQUE:

Les chiffres sur l'écran du contrôleur indiquent la température de chauffage (°C/°F), la progression de la charge (%) et le temps de synchronisation (m).

- Lorsque le produit est en cours d'utilisation (état de non-charge), le nombre indique la température de chauffage.
- Pendant l'utilisation, le voyant du mode anti-mistouch est allumé, °C est allumé, le nombre représente la puissance actuelle, et revient à % après quelques secondes, et le nombre représente à nouveau la température de chauffage actuelle.
- Lorsque la fonction de synchronisation est utilisée, le voyant vert de m est allumé et le chiffre indique l'heure réglée.
- Lorsque le produit est en cours de charge, le nombre représente la progression de la charge; lorsque le produit est complètement chargé, l'écran affiche "FU".

- 2 -

APPLICABLE À PLUSIEURS PARTIES

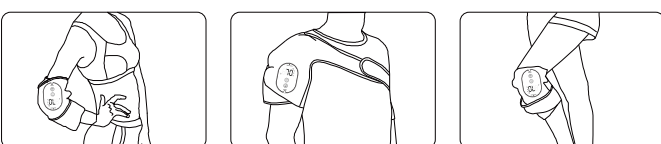

GUIDE D'UTILISATION

1. Mise sous tension

Appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour allumer l'appareil. Si l'appareil ne s'allume pas normalement, cela peut être dû à un manque d'énergie; veuillez récharger après l'avoir rechargé.

2. Porter

Fixez la genouillère à la position genou/coude/épaule.

3. Fonction de chauffage

Cliquez sur [°C] pour activer la fonction de chauffage, et le système se règle automatiquement sur la première vitesse, 45°C. Il existe six vitesses de chauffage: 45°C<50°C<55°C<60°C<65°C<70°C. Cliquez à nouveau sur [°C] pour changer de vitesse de chauffage, et la vitesse de chauffage passera cycliquement d'une température basse à une température élevée.

Remarque : une fois la fonction de chauffage activée, la température augmente lentement et ne passe pas directement à la température que vous avez réglée. Lorsque vous réglez le niveau de température, la température cesse d'augmenter ou de diminuer après avoir atteint le niveau que vous avez réglé.

4. Fonction de chronométrage

Cliquez sur [m] pour lancer la première vitesse de la fonction de chronométrage : 15 minutes. La fonction de minutage compte trois vitesses : 15min<30min<45min. Cliquez à nouveau sur [m] pour passer de 30 minutes à 45 minutes. Cliquez sur [m] une quatrième fois, l'écran affichera 0min, ce qui signifie que la fonction de chronométrage est désactivée. Si vous souhaitez activer la fonction de chronométrage, cliquez à nouveau sur [m].

- 3 -

5. Mode anti-fausse touches

Après avoir réglé le niveau de température et le niveau de temporisation, appuyez brièvement sur le bouton de commande, [m] s'allume et la fonction anti-fausse touche est activée. En même temps, °C s'allume, le chiffre représente la puissance actuelle, et revient à % après quelques secondes, et le chiffre représente à nouveau la température de chauffage actuelle. Vous ne pouvez pas faire fonctionner le régulateur à ce moment-là afin d'éviter tout contact accidentel avec les boutons pendant l'utilisation du produit. Si vous souhaitez utiliser le contrôleur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour désactiver le mode anti-mistouch. A ce moment-là, [m] s'éteint.

6. Passer de °C à °F

Appuyez longuement sur [°C] et [°F] pendant deux secondes en même temps, l'unité de température passera de °C à °F.


7. Éteignez

Après utilisation, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la genouillère. (Si vous réglez la fonction de synchronisation, la machine s'éteindra automatiquement lorsque le temps sera écoulé, sans votre opération manuelle.)

8. Rangement

Conservez la genouillère, les sangles d'extension et le câble de chargement ensemble pour ne pas perdre d'accessoires.

À PROPOS DE LA CHARGE

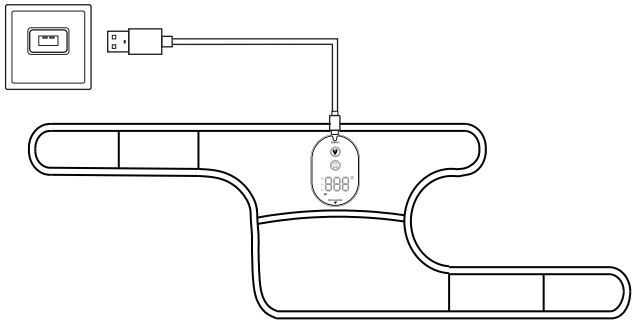

- 4 -

- Lorsque l'écran indique que la puissance est inférieure à 20 %, chargez l'appareil à temps.
- Assurez-vous que la genouillère est éteinte avant de la charger.
- Sortez le câble de charge équipé, insérez-le dans l'interface Type-C du contrôleur, et connectez l'interface USB du câble de charge au dispositif de charge.
- L'écran d'affichage du contrôleur s'allume, indiquant que la genouillère a commencé à se charger, et le nombre représente la puissance actuelle. Pendant le processus de charge, le nombre augmente lentement, indiquant la progression de la charge.
- L'écran d'affichage du contrôleur affiche "FU", indiquant que la genouillère est complètement chargée.

Remarque :

Do not operate the controller during charging. Our knee brace cannot be used while charging.

PRÉCAUTIONS

- Portez des vêtements fins lors de l'utilisation, tels que des chemises ou des vêtements de yoga ; ne portez pas de vêtements épais, car des vêtements trop épais peuvent affecter l'effet.
- Ne portez pas ce produit directement sur votre corps (sans la barrière des vêtements), il brûlerait votre peau.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser l'équipement à haute température pendant une longue période (risque de brûlures ou de lésions cutanées).
- Ne pas exposer la genouillère à la lumière du soleil ou au feu, afin de ne pas endommager le conducteur thermique de l'isolant.
- Ne pas démonter ou modifier la feuille chauffante et le circuit de commande, afin de ne pas endommager artificiellement l'élément chauffant.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Lorsque vous commencez à utiliser ce produit, il est recommandé de sélectionner le mode basse température. Une légère rougeur de la peau et de la fièvre après l'utilisation sont normales. Toutefois, si des rougeurs ou des gonflements cutanés importants apparaissent après l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Il est recommandé d'éviter tout contact direct avec la peau. Lorsque le produit est utilisé pendant une longue période, sa température est très élevée. Attention aux brûlures.
- Il est recommandé de commencer par la température la plus basse et de l'ajuster progressivement à une température appropriée en fonction des conditions individuelles afin d'éviter les brûlures de la peau pour les personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur.
- Si l'utilisateur ressent une quelconque gêne pendant l'utilisation, comme des vertiges, des maux de tête, de l'asthme, etc., veuillez cesser immédiatement l'utilisation et analyser la cause de la gêne.
- Lorsque vous n'utilisez pas la genouillère, déchargez-la et rangez-la correctement.
- Ce produit est un appareil ménager et ne peut remplacer un équipement médical ou un médicament.
- Veillez à utiliser l'appareil conformément aux instructions, car une utilisation irrégulière peut entraîner des accidents de sécurité ou des dommages matériels.

- 5 -




⚠ AVERTISSEMENT

Consulter un médecin avant d'utiliser :

- Patients souffrant d'ostéoporose, de fractures, d'entorses, de douleurs aiguës et d'autres maladies des jambes ;
- Patients souffrant de troubles nerveux au niveau des jambes ou de troubles sensoriels au niveau de la peau ;
- Les femmes enceintes ou en post-partum ;
- Les patients souffrant de maladies cardiaques ;
- Le produit a une fonction chauffante; les personnes qui ne sont pas sensibles à la température doivent faire attention.

A PROPOS DU NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage, veillez à éteindre complètement l'appareil.
- Lors du nettoyage, essuyez la genouillère avec un chiffon humide, mais veillez à ne pas mouiller la partie contrôleur. N'utilisez pas de nettoyants puissants ou de brosses dures.
- Faire sécher la genouillère à plat.
- Ce produit ne peut pas être lavé en machine ou à la main.
- Ne pas nettoyer à sec pour éviter d'endommager l'élément chauffant.

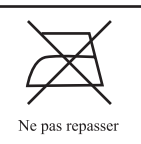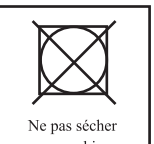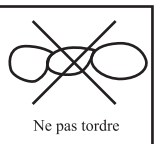

- 6 -