



Manuel d'utilisation

MULTIFONCTIONNELLE

APPAREIL DE MASSAGE POUR LE SOIN DE LA PEAU DU VISAGE

Précautions d'utilisation :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer. Il ne peut pas être allumé pendant la charge.
2. Lors de l'utilisation, maintenez les bandes de détection de chaque côté de la baguette, la tête de massage en contact avec la peau.
3. Veuillez l'utiliser avec un coton pour nettoyer les pores et retirer le démaquillant ou la lotion nettoyante avec un coton. Ne l'utilisez pas avec un nettoyant pour le visage/une huile nettoyante.
4. Ce produit utilise la technologie ionique à micro-courant. Si vous ressentez une légère sensation de picotement, c'est normal.
5. Lors de l'utilisation, ne restez pas au même endroit pendant plus de 3 secondes pour éviter toute irritation de la peau

Fonctions :

Appareil de nettoyage et de rajeunissement

Un appareil de beauté du visage avec ions galvaniques, chauffage, micro-vibrations et lumière rouge. Cet appareil aide au nettoyage en profondeur, au rajeunissement et au lifting du visage.


***Ionique galvanique :** Utilisant le principe d'un léger courant d'impulsion entre l'anode et la cathode, il peut ramollir et nettoyer les dépôts de saleté et de sébum qui se logent dans les pores. Ce traitement en profondeur agit comme un nettoyant naturel qui aide à réduire la taille des pores. Les ions oxygène chargés enrichis activent les nutriments pour réparer la peau endommagée.

***Micro-vibrations :** L'utilisation de vibrations physiques et la stimulation électrique sont deux moyens d'augmenter l'élasticité et d'améliorer le métabolisme cellulaire.

***Massage chaud :** Favorise l'absorption des produits de soins de la peau, aide à raffermir la texture de la peau et à la maintenir plus élastique.


***Lumière rouge :** La lumière rouge de 640 nm à 650 nm pénètre en profondeur dans le derme, aide à stimuler la croissance de nouveau collagène et d'élastine, réduit également les rides et améliore l'élasticité de la peau

Fonctions :

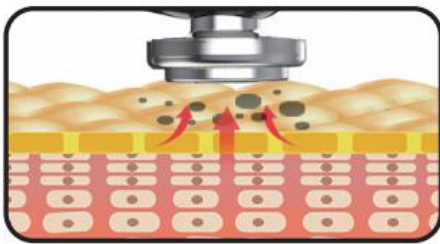


MODE NETTOYAGE À CHAUD

La chaleur aide à ouvrir les pores de la peau, nettoyant la peau en profondeur pour affiner les pores et éliminer les taches brunes.

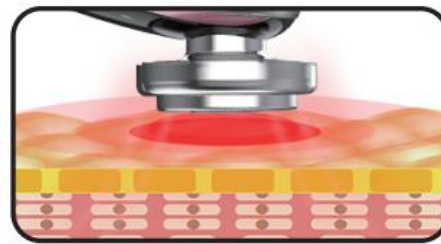


MODE PHOTOTHÉRAPIE

Introduit les produits de soin en profondeur dans la peau, activant ainsi l'élasticité des cellules. L'utilisation de la lumière rouge contribue à blanchir la peau et à lisser les rides.

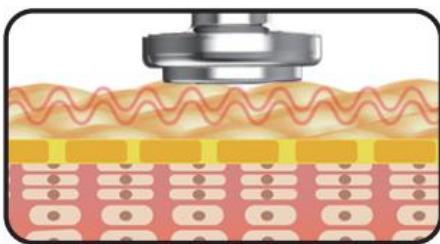

MODE LIFTING DE LA PEAU

Favorise la circulation sanguine, améliore l'élasticité et le raffermissement de la peau et crée le meilleur état possible.

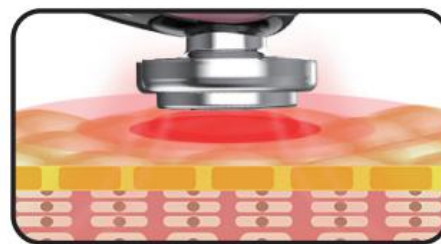

MODE THÉRAPIE DES YEUX

Introduisez la crème pour les yeux ou votre sérum pour les yeux préféré de manière adéquate, favorisez l'absorption de la crème ou du sérum pour les yeux et obtenez le résultat maximal de l'utilisation de vos produits de soin des yeux préférés

Composants :



Paramètres du produit

Nom du produit :	Baguette de rajeunissement photonique
Numéro de modèle :	W-618
Taille du produit :	4,3 x 16,8 cm
Poids du produit :	Environ 90 g
Contenu de l'emballage :	1 appareil ; 1 manuel d'instructions, 1 câble USB
Entrée :	CC 3,7 V 10,6 A
Tension nominale/Capacité nominale	3,7 V/350 mAh
Temps de charge	2 à 3 heures
Intensité :	3 niveaux
Pays d'origine :	Chine
Norme de transport :	GB4706.1-2005 GB-4706.15-2008

Remarque : compte tenu de la politique constante d'amélioration continue des produits, la société se réserve le droit d'améliorer les spécifications des produits. Le produit réel peut varier

Utilisation des quatre modes :

Précautions :

1. Nettoyez et régénérez, nettoyez d'abord la saleté, puis utilisez le nettoyant (pas besoin d'utiliser l'appareil pour nettoyer le visage). Un nettoyage en profondeur aspirera la saleté des pores jusqu'à la surface de la peau, puis lavera la saleté avec le nettoyant pour le visage.
2. Chaque mode est chronométré sur 4 minutes. Après 4 minutes, l'appareil passe en mode veille. Après 1 minute supplémentaire, il s'éteint automatiquement en l'absence d'action.
3. Lors de l'utilisation, vous devez tenir la bande de détection d'ions des deux côtés du fuselage et utiliser la tête de massage pour entrer en contact avec la peau afin de former un circuit. Veuillez garder la peau humide lors de l'utilisation, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
4. Si vous l'utilisez sur le visage de quelqu'un d'autre, vous devez entrer en contact avec la peau de l'utilisateur pour former un circuit, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
5. Veuillez utiliser l'appareil conformément à la durée spécifiée dans le manuel. Ne l'utilisez pas de manière excessive

1. Guide du mode nettoyage à chaud (nécessite un démaquillant/une lotion nettoyante et un coton)

Ce mode permet de nettoyer efficacement les impuretés des pores et de rendre la peau brillante.

Fréquence d'utilisation : 2 à 3 fois par semaine. Les personnes à la peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation en conséquence.

Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes par fois, et 1 à 2 minutes par fois pour les peaux sensibles.



Retirez l'anneau



Fixez un coton



Appliquez le
démaquillant



Appuyez sur le bouton
d'alimentation pendant 3 secondes
pour allumer



Gardez les doigts en
contact avec le capteur





Nettoyez le visage

2. Guide du mode photothérapie (nécessite un tonique, une lotion, une essence)

Ce mode améliore l'activité cellulaire, atténue les rides et aide les produits de soin à hydrater la peau en profondeur. Fréquence d'utilisation : Peut être utilisé une fois par jour, matin et soir. Les personnes à la peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation en conséquence

Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/fois, 1 à 2 minutes/fois pour les peaux sensibles. Veuillez arrêter d'utiliser l'appareil lorsque les produits de soin sont absorbés par la peau.

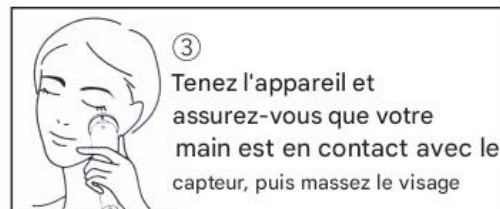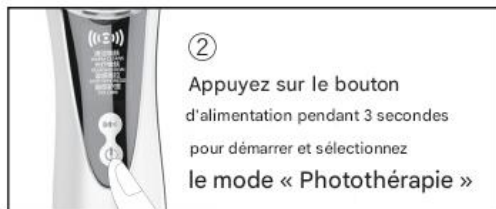

3. Mode Lifting de la peau (à utiliser avec un masque)

Ce mode ravive et détend la peau en douceur, aidant à lui redonner son éclat et sa vitalité.

Fréquence d'utilisation : quotidienne




Appliquer le masque
sur le visage



Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant
3 secondes pour allumer l'appareil, puis
sélectionnez le mode Lifting de la peau.



Tenez l'instrument et
assurez-vous que la main
touche les capteurs et massez le
visage. Lorsque vous utilisez le
« lifting chaud », ne restez pas
au même endroit plus de trois
secondes pour éviter toute gêne
cutanée.

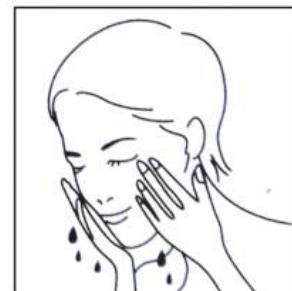




Retirez le masque et nettoyez le
visage.

4. Guide du mode soin des yeux (à utiliser avec une crème pour les yeux)


Ce mode permet d'introduire complètement la crème pour les yeux ou l'essence pour les yeux, et de favoriser l'absorption de la crème pour les yeux ou de l'essence pour les yeux.

Fréquence d'utilisation : Peut être utilisé une fois par jour, matin et soir. Les personnes ayant la peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation en conséquence

Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, 1 à 2 minutes/temps pour les peaux sensibles. Ne pas appliquer plus de crème ou d'essence pour les yeux après absorption.

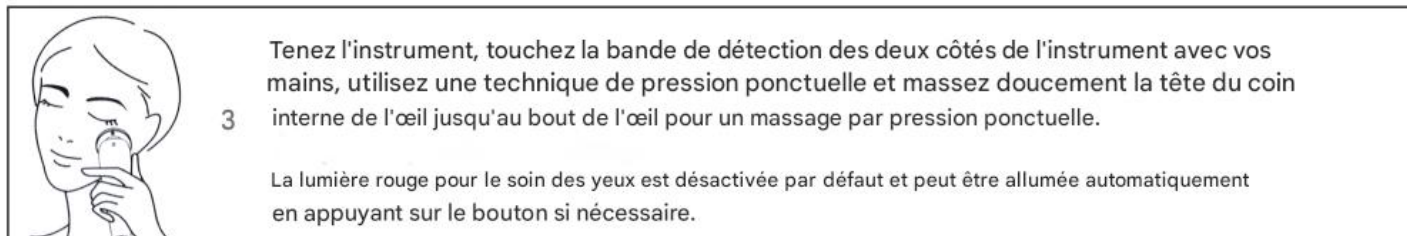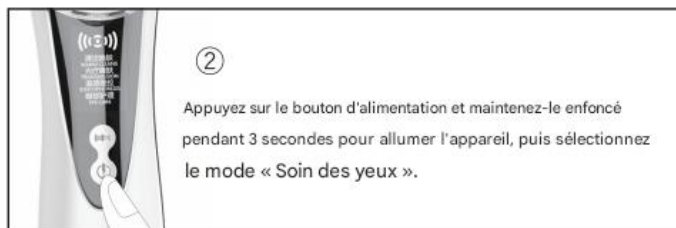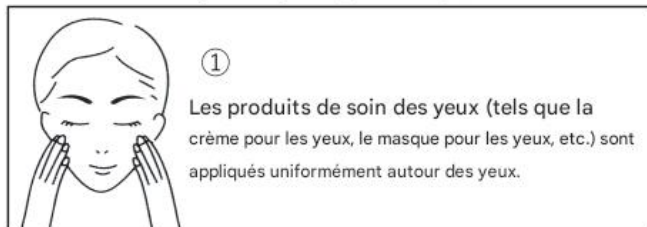

Pratiques recommandées :

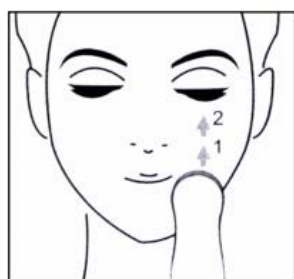

Menton




Placez l'appareil horizontalement au centre inférieur du menton, avec un mouvement courbé et rythmé pendant 1 à 2 secondes, faites glisser l'appareil de gauche à droite et inversement.




Contour du visage

Placez l'appareil sur la joue. En vous déplaçant vers la pommette, faites glisser l'appareil de bas en haut en rythme pendant 1 à 2 secondes

Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, 1 à 2 minutes/temps pour les peaux sensibles. Ne pas appliquer plus de crème ou d'essence pour les yeux après absorption.

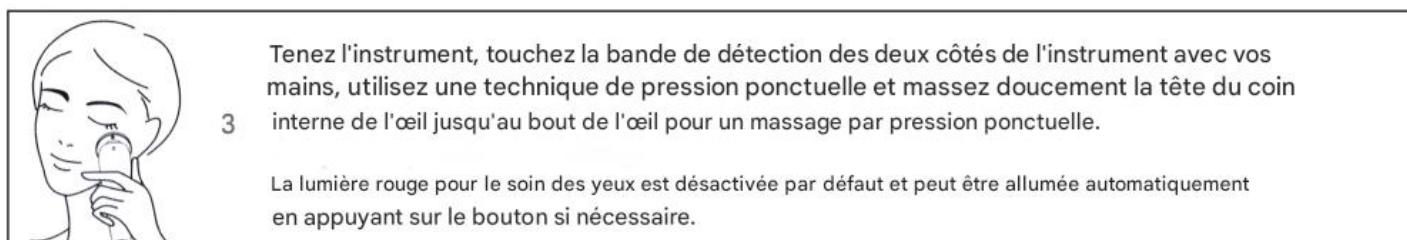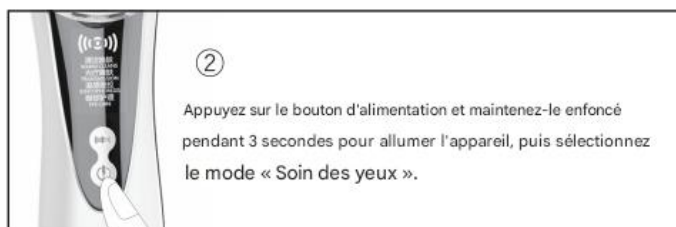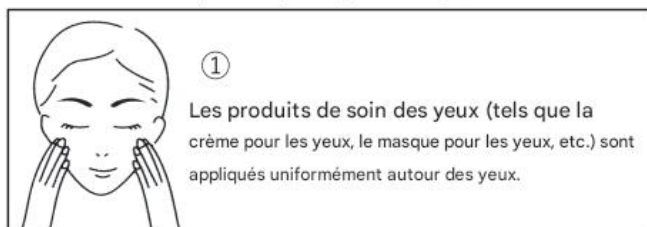

Pratiques recommandées :

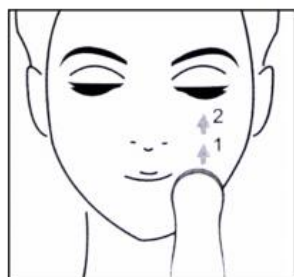

Menton

Placez l'appareil horizontalement au centre inférieur du menton, avec un mouvement courbé et rythmé pendant 1 à 2 secondes, faites glisser l'appareil de gauche à droite et inversement.



Contour du visage

Placez l'appareil sur la joue. En vous déplaçant vers la pommette, faites glisser l'appareil de bas en haut en rythme pendant 1 à 2 secondes

Utilisations recommandées :

Rafrâichissement matinal

Réveille la peau + apaise les œdèmes + lisse le maquillage

- Nettoyer le visage
- Appliquer le tonique, l'essence et la lotion
- Mode rajeunissement cutané par photothérapie
- Maquillage

Réparation du soir

Favorise l'absorption cutanée +
Hydratation et nutrition intenses + Réparation nocturne

- Nettoyage en profondeur (2 à 3 fois par semaine en mode nettoyage et rajeunissement de la peau).
- Nettoyer le visage
- Appliquer le tonique, l'essence et la lotion (mode rajeunissement cutané par photothérapie)
- ' Introduction au masquage (mode lifting tempérant)

Précautions de sécurité :

1. Ne convient pas à la chirurgie plastique du visage et aux implants sous-cutanés ;
Veuillez utiliser sous la supervision de votre médecin si vous êtes enceinte.
2. Ne lavez pas l'appareil. Vous ne devez pas mettre la tête Photon en contact avec des objets métalliques ;
Pour nettoyer, utilisez une lingette nettoyante humide.
3. Ne le placez pas dans la salle de bain ou dans un endroit humide, cela pourrait provoquer un court-circuit.
4. Cet appareil convient au visage et au cou, mais veuillez éviter les pustules et l'acné inflammatoire

Aspects de maintenance :



Veuillez ne pas laver le corps de la baguette.
L'instrument pourrait mal fonctionner. Veuillez utiliser un chiffon sec ou un petit chiffon doux.



Nettoyage du couvercle de protection.
Si le couvercle est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et propre, puis rincez à l'eau.



N'essuyez pas le corps principal de la baguette avec une solution corrosive.
Veuillez ne pas utiliser d'alcool, d'eau ou de lingette démaquillante. Cela pourrait entraîner une défaillance du produit ou des fissures, une décoloration des pièces, etc